

Produktsortiment

BD Medical Surgical Systems 2012/2013



BD

Helping all people
live healthy lives



BD er en medicoteknisk virksomhed, der fremstiller og markedsfører produkter til primær sundhedspleje og hospitaler samt forsknings- og kliniske laboratorier.

Vores mission er at hjælpe mennesker til at leve et så sundt liv som muligt, hvilket vi stræber efter ved at fremstille og markedsføre et bredt sortiment af medicoteknisk udstyr, diagnostiske instrumenter og laboratorieudstyr.

BD er opdelt i tre segmenter:

BD Medical, der er førende inden for infusionsterapi, insulininjektion og forfyldte sprøjter. Det er her, vores forretningsområde BD Medical Surgical Systems findes.

BD Biosciences, der markedsfører produkter og services, der understøtter biomedicinske opdagelser og diagnosticering af sygdomme.

BD Diagnostics, der markedsfører løsninger til prøvetagning, identifikation og transport inden for klinisk kemi og mikrobiologi.

BD Medical Surgical Systems

Som førende producent og leverandør af produkter, der benyttes i dagligdagen inden for sundhedsplejen, har BD Medical Surgical Systems som målsætning at bidrage til forbedret sikkerhed for både patienter og sundhedspersonale. I dag betjener vi sundhedsinstitutioner med et bredt sortiment af produkter til injektions- og infusionsterapi samt regional anæstesi.

Mange af vores patenter og produkter som f.eks. BD Venflon™ Pro Safety infusionskanyle, BD PlastiPak™ injektionssprøjte og BD Whitacre™ spinalkanyle har nærmest udviklet sig til professionelle standarder.

I vores stræben efter at bidrage til mindskede risici inden for sundhedsplejen udvikler vi hele tiden ny produkter. En anden kendt risiko er smittespredning til patienten via skyllevæsker, hvilket minimeres med vores forfyldte NaCl-sprøjte BD™ PosiFlush™. BD™ PosiFlush™ er udformet specifikt til skylning af IV-katetre – hurtig, sikker og nem i brug.

BD Medical Surgical Systems har desuden markedets bredeste sortiment af sikkerhedsprodukter til injektion og infusion. Disse produkter er udformede med henblik på at minimere risikoen for stikskader og blodeksponering ved behandling. Det gælder f.eks. BD Venflon™ Pro Safety, BD Nexiva™ lukket IV-katetersystem og BD Eclipse™ sikkerhedskanyle.

Men det stiller vi os ikke tilfredse med! Vi arbejder derfor aktivt med uddannelse inden for vores produktområder og afholder seminarer om mindskelse af risikoen for blodeksponering af sundhedspersonale samt nosokomial smitte af patienter. Vi har mange års erfaring med disse områder og arbejder ofte tæt sammen med vores kunder om problemområdet.

Kontakt os for yderligere oplysninger!

Patienternes og sundhedspersonalets sikkerhed er omdrejningspunktet for BD's arbejde.

Ved diskussion af sikkerhed inden for behandling har fokus historisk set ligget på patientsikkerheden. BD arbejder bl.a. aktivt for at fjerne risiciene forbundet med infusionsterapi. Sundhedspersonalets sikkerhed får ligeledes stor opmærksomhed. En stor risiko, som sundhedspersonalet udsættes for i dagligdagen, er risikoen for blodeksponering, dvs. ved et uheld at stikke sig på en kanyl eller få blodstænk på huden, i øjnene eller i munden.

Stikskader og blodeksponering medfører risiko for kontakt med inficeret blod og overførsel af blodpatogener. Blandt risiciene forbundne med stikskader og blodeksponering har der især været fokuseret på HIV, hepatitis C og hepatitis B.

Der findes imidlertid også andre typer skader, der kan få alvorlige konsekvenser for både sundhedspersonale og patienter. Konkretisering af disse risici og problemer er et vigtigt første skridt til at forebygge ulykker.

I Europa findes der i dag mere end 100 medarbejdere indenfor sundhedssektoren, der er blevet smittet med HIV som led i deres arbejde.¹ Det hører med til arbejdsgiverens ansvar at beskytte sine ansatte mod f.eks. blodeksponering. Undersøgelser har vist, at en kombination af uddannelse, øget bevidstgørelse, implementering af sikkerhedsprodukter og mere sikre rutiner kan mindske risikoen for stikskader og blodeksponering mærkbart.²

I juni 2010 offentliggjordes et nyt EU-direktiv om forebyggelse af stik- og skæreskader inden for sundhedsplejen. De nye bestemmelser skal være indarbejdet i den nationale lovgivning senest per maj 2013.


Formålet med direktivet er følgende:

- At opnå et så sikkert arbejdsmiljø som muligt
- At forebygge, at arbejdstagere skades af skarpe genstande til medicinsk brug (inklusive nålestik)
- At beskytte arbejdstagere udsatte for risiko
- At udvikle en integreret metode til at fastsætte strategier for risikovurdering, forebyggelse af risici, uddannelse og oplysning samt tiltag for øget bevidstgørelse og overvågning
- At indføre rutiner for tilbagemelding og opfølgning

BD har i mange år arbejdet efter denne strategi for at minimere risikoeksponeringen inden for sundhedsplejen. Ved at kombinere produktudvikling med anbefalinger til sikre arbejdsrutiner samt klinisk uddannelse og træning håber vi at kunne bidrage til et mere sikkert arbejdsmiljø samt øget kvalitet af pleje og behandling.

Uddannelsesvirksomhed

BD gennemfører en række kliniske kurser, der bl.a. gennemgår potentielle risici ved behandling for både sundhedspersonale og patienter, samt hvordan risiciene minimeres. Vi giver desuden praktisk træning i brug af vores produkter, hvilket efter BD's opfattelse er en vigtig forudsætning for at opnå et optimalt brugs- og behandlingsresultat.

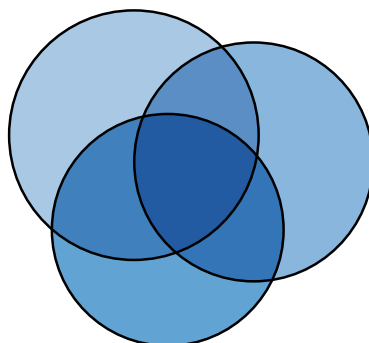

Rutiner

BD bistår gerne med rådgivning om optimal klinisk håndtering samt efterlevelse af procedurer, protokoller og lokale/nationale retningslinjer.

Produkter

BD har et bredt sortiment af sikkerhedsprodukter til injektion og infusion. Vi hjælper gerne med planlægning og gennemførelse af produkttest samt bistand ved skift til ny produkter.

Referencer:

1. www.eucomed.com
2. F. Lamontagne, Role of Safety-Engineered Devices in Preventing Needlestick Injuries in 32 French Hospitals, Infection Control and Hospital Epidemiology, Jan 2007, vol.28, no. 1

Injektion og skylning

BD Microlance™ 3 injektionskanyler
BD™ Blunt fill og Blunt filter optræks/aspirationskanyler
BD Eclipse™ sikkerhedskanyler
BD SafetyGlide™ sikkerhedskanyler
BD Integra™ injektionssprøjte med indtrækkelig injektionskanyler
BD Discardit™ II to-komponentsprøjte
BD Emerald™ 2, 5, 10 ml, 3-komponent sprøjte
BD Plastipak™ tre-komponentsprøjte 1 ml
BD Plastipak™ tre-komponentsprøjte 2, 3, 5, 10 ml
BD Plastipak™ 20, 30, 50, 100 ml, tre-komponentsprøjte
BD™ insulinsprøjter med/uden kanylehætte
BD AutoShield Duo™ penkanyler med automatisk beskyttelsesskærm
BD Micro-Fine+™ injektionspen
BD™ oralsprøjte
BD™ Sharps Container, beholder til stikkende/skærende risikoaffald
BD PosiFlush™, forfyldt NaCl-sprøjte til skylning

Perifer infusion

BD Venflon™ infusionskanyler
BD Venflon™ Pro infusionskanyler
BD Venflon™ Pro Safety infusionskanyler med sikkerhedshætte
BD Venflon™ infusionskanyler
BD Insyte-N™ / BD Insyte-W™ infusionskanyler
BD Insyte-N™ Autoguard™ / BD Insyte-W™ Autogard
infusionskanyler med kanylehætte
BD Nexiva™ lukket IV-katetersystem – med Y-kobling
BD Nexiva™ lukket IV-katetersystem – med Connecta trevejsbane
BD Nexiva™ Diffusics™ Lukket integreret IV-katetersystem
til injektion af kontraststof ved højt tryk
BD Vecafix™ / BD Veca-C™ infusionsforbinding
BD Q-Syte™ split septum
BD Connecta™ infusionsbane
BD Connecta™ Multiflo infusionskobling
BD Connecta™ forlængerslange
BD™ propper og BD™ beskyttelseshætte
BD™ infusionsanordning R 87
BD Flopro™ overførselskanyler
BD™ ensretterventil

Lukket system til lægemiddeloverførsel

BD PhaSeal™ produkter til infusion
BD PhaSeal™ tilbehør
BD PhaSeal™ Protector
BD PhaSeal™ Injector
BD PhaSeal™ Connector

Arteriekanyler

BD™ arteriekanyler med BD FloSwitch™
BD Insyte-A™ arteriekateter
BD™ arterielle angiografikanyler

Regionalanæstesi

BD Whitacre™ spinalkanyler (pencil point)
BD™ spinalkanyler (Quincke-slibning)
BD™ spinalkanyler (Quincke-slibning) specialstørrelser
BD Perisafe™ Plus! Epiduralsæt
BD Durasafe™ Plus! Kombineret spinal-/epiduralsæt
BD™ epiduralkanyler, LOR-sprøjte

Operation

BD™ biopsikanyler
BD E-Z Scrub™, til præoperativ håndvask
BD™ præ-anæstesisæt

BD's kursusprogram


BD's sikkerhedsseminar
BD's kursusprogram – perifer IV-terapi
BD's kursusprogram – skylning af IV-katetre

Appendiks

BD Microlance™ 3 injektionskanyle



- Unik slibevinkel og poleringsmetode medfører mindre ubehag for patienten ved injektion med BD Microlance™ og mindre risiko for udstansning
- Transparent og farvekodet ansats for hurtig og sikker kontrol af flow og størrelse
- Kanyler med tynd væg for optimalt flow

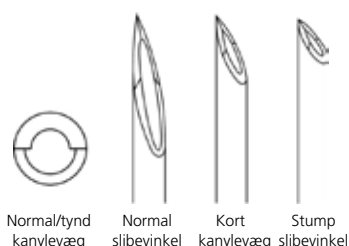

Dimensioner udv.Ø × længde G × tommer	Dimensioner udv.Ø × længde mm	Kanylens væg	Slibevinkel	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
30 × 1/2	0,30 × 13	normal	normal	gul	100/5000	304000
27 × 1/2	0,40 × 13	normal	normal	grå	100/5000	300635
27 × 3/4	0,40 × 19	normal	normal	grå	100/5000	302200
26 × 1/2	0,45 × 13	normal	normal	brun	100/5000	303800
26 × 3/8	0,45 × 10	normal	kort	brun	100/5000	300300
26 × 5/8	0,45 × 16	normal	normal	brun	100/5000	304300
25 × 5/8	0,50 × 16	normal	normal	orange	100/5000	300600
25 × 1	0,50 × 25	normal	normal	orange	100/5000	300400
24 × 1	0,55 × 25	normal	normal	lilla	100/5000	304100
23 × 1	0,60 × 25	tynd	normal	blå	100/5000	300800
23 × 1 1/4	0,60 × 30	tynd	normal	blå	100/5000	300700
22 × 1	0,70 × 25	tynd	normal	sort	100/5000	304727
22 × 1 1/4	0,70 × 30	tynd	normal	sort	100/5000	300900
22 × 1 1/2	0,70 × 40	tynd	normal	sort	100/5000	301000
22 × 2	0,70 × 50	normal	normal	sort	100/4000	300094
21 × 5/8	0,80 × 16	tynd	normal	grøn	100/5000	304434
21 × 1	0,80 × 25	tynd	normal	grøn	100/5000	301156
21 × 1 1/2	0,80 × 40	tynd	normal	grøn	100/5000	304432
21 × 2	0,80 × 50	normal	normal	grøn	100/4000	301155
20 × 1	0,90 × 25	tynd	normal	gul	100/5000	304827
20 × 1 1/2	0,90 × 40	tynd	normal	gul	100/5000	301300
19 × 1	1,10 × 25	tynd	normal	beige	100/5000	301700
19 × 1 1/2	1,10 × 40	tynd	normal	beige	100/5000	301500
19 × 2	1,10 × 50	tynd	normal	beige	100/4000	301750
18 × 1 1/2	1,20 × 40	tynd	kort	lyserød	100/5000	304622
18 × 2	1,20 × 50	normal	kort	lyserød	100/4000	301900
16 × 1 1/2	1,60 × 40	normal	normal	hvid	100/5000	300637
BD™ Injektionskanyle, specialstørrelser						
27 × 1 1/2	0,4 X 38	normal	normal	grå	100/5000	X076065
21 × 3 1/2	0,8 × 80	normal	normal	lysegrøn	100/5000	X070001
14 × 3 1/4	2,0 × 80	normal	normal	grøn	100/5000	X076051

Materialeindhold

Ansats og beskyttelseshætte: polypropylen
Kanyler: Rustfrit stål (AISI 304)
Lim: Epoxyresin
Overfladebehandling: Siliconeolie

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Papir
Transparent plastfilm
(polyethylen/polyamid)
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode
Ethylenoxid



5 år

**CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)**



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD™ Blunt fill og Blunt filter



BD™ optrækskanyle, stump:

- Optræks/aspirationskanyle med stump spids minimerer risikoen for stikskader ved brug
- Kanylens spids har en vinkel på 45°, hvilket mindsker risikoen for udstansning af gummipartikler, når membranen penetreres ved aspiration
- Optræks/aspirationskanylen med filter er udstyret med et 5-µm-filter for at minimere risikoen at suge glaspartikler op ved aspiration fra glasampuller. Et 5-µm-filter mindsker risikoen for injektion af eventuelle glaspartikler med op til 98-99 %¹



Beskrivelse	Dimensioner udv.Ø × længde G × tommer	Dimensioner udv.Ø × længde mm	Slibevinkel	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
Uden filter	18 × 1 1/2	1,20 × 40	stump	rød	100/1000	305180
Uden filter	18 × 1	1,20 × 25	stump	rød	100/1000	305181
Med 5-µm-filter	18 × 1 1/2	1,20 × 40	stump	lyserød/lilla	100/1000	305211

Materialeindhold

Ansats og beskyttelseshætte:
polypropylen
Kanyle: Rustfrit stål (AISI 304)
Lim: Epoxyresin
Overfladebehandling: Siliconeolie
Filter: polyester

Emballagemateriale

Copolymer
Papir
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Art.nr. 305180:
Gammastråling
Art.nr. 305211:
Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)

BD No Kor™ Admix optræks/aspirationskanyler:

- Mindsker risikoen for udstansning af gummipartikler samt lægemiddellækage ved aspiration
- BD No Kor™ -kanylens skalpellignende spids glider hurtigt og ubesværet gennem beholderens membran



Dimensioner G × tommer	Dimensioner udv.Ø × længde mm	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
18 × 1 1/2	1,20 × 40	lyserød	100/1000	300779
16 × 1	1,60 × 25	lilla	100/1000	300780

Materialeindhold

Ansats og beskyttelseshætte: polypropylen
Kanyle: Rustfrit stål (AISI 304)
Lim: Epoxyresin
Overfladebehandling: Siliconeolie

Emballagemateriale

Papir
Termoplast
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode
Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Referencer:

1. Sabon R.L., et al. Anesthesiology 70(1989):859-862: 10-ml-ampuller



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Eclipse™ sikkerhedskanyle



- Robust beskyttelseshætte, der beskytter hele kanylen efter aktivering
- Sikkerhedsmekanismen aktiveres med én hånd umiddelbart efter injektion (intet behov for hårdt underlag for aktivering)
- Sikker og tydeligt synlig/hørbar låsning af sikkerhedsmekanismen
- Kan ikke deaktiveres
- Minimalt ændret injektionsteknik
- Positionen af nåleøjlet i forhold til sikkerhedsmekanismen letter injektion i lav vinkel
- BD Microlance™ 3 injektionskanyle – unik slibevinkel og poleringsmetode medfører mindre ubehag for patienten
- Sikker tilslutning til både Luer- og Luer-Lok™ -sprøjter



BD Eclipse™ sikkerhedskanyle, særskilt emballeret

Dimensioner G x tommer	Dimensioner udv.Ø x længde mm	Slibevinkel	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
30G x 1/2	0,3 x 13	normal	gul	100/1200	305771
27G x 1/2	0,4 x 13	normal	grå	100/1200	305770
27G x 3/4	0,4 x 19	normal	grå	100/1200	305889
27G x 1 1/2	0,4 x 40	normal	grå	100/1200	302436
25G x 5/8	0,5 x 16	normal	orange	100/1200	305760
25G x 1	0,5 x 25	normal	orange	100/1200	305891
23G x 1	0,6 x 25	normal	blå	100/1200	305892
23G x 1 1/4	0,6 x 30	normal	blå	100/1200	305886
22G x 1 1/4	0,7 x 30	normal	sort	100/1200	305887
21G x 1	0,8 x 25	normal	grøn	100/1200	305894
21G x 1 1/2	0,8 x 40	normal	grøn	100/1200	305895
20G x 1	0,9 x 25	normal	gul	100/1200	305899
20G x 1 1/2	0,9 x 40	normal	gul	100/1200	305888
18G x 1 1/2	1,2 x 40	normal	lyserød	100/1200	302437

BD Eclipse™ Combo, injektionssprøjte og sikkerhedskanyle, sampak

Sprøjte Luer-Lok™ Volumen ml	Kanyle Dimensioner G x tommer	Dimensioner udv.Ø x længde mm	Slibevinkel	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
3	25G x 5/8	0,5 x 16	normal	orange	50/300	305781
3	23G x 1	0,6 x 25	normal	blå	50/300	305782
3	22G x 1 1/2	0,7 x 40	normal	sort	50/300	305783
5	22G x 1 1/2	0,7 x 40	normal	sort	50/300	305785
10	22G x 1 1/2	0,7 x 40	normal	sort	50/300	305786

Materialeindhold

Ansats, beskyttelseshætte og sikkerhedsmekanisme: polypropylen
Kanyle: Rustfrit stål (AISI 304)
Lim: Epoxyresin
Overfladebehandling: siliconeolie
Cylinder og stempelstang: polypropylen
Pakning: Syntetisk polyisopren (latexfri)
Overfladebehandling: Siliconeolie

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Polyethylen
Polyamid
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode
Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF (klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD SafetyGlide™ sikkerhedskanyler



- Mindsket risiko for stikskader
- Sikkerhedsmekanismen aktiveres med én hånd umiddelbart efter injektion (intet behov for hårdt underlag for aktivering)
- Sikker og tydeligt synlig/hørbar låsning af sikkerhedsmekanismen
- Kan ikke deaktiveres
- Minimalt ændret injektionsteknik
- Positionen af nåleøjet i forhold til sikkerhedsmekanismen letter injektion i lille vinkel
- BD Microlance™ 3 injektionskanyler – unik slibevinkel og poleringsmetode medfører mindre ubehag for patienten



BD SafetyGlide™ sikkerhedskanyler

Dimensioner G x tommer	Dimensioner udv.Ø x længde mm	Slibevinkel	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
27G x 5/8	0,4 x 16	normal	grå	50/500	305921
25G x 5/8	0,5 x 16	normal	orange	50/500	305901
25G x 1	0,5 x 25	normal	orange	50/500	305916
23G x 1	0,6 x 25	normal	blå	50/500	305902
22G x 1 ½	0,7 x 40	normal	sort	50/500	305900
21G x 1	0,8 x 25	normal	sort	50/500	305915
21G x 1 ½	0,8 x 40	normal	grøn	50/500	305917
18G x 1 ½	1,20 x 40	kort	lyserød	50/500	305918

BD SafetyGlide™ injektionssprøjte med fast kanyler, tuberkulin/allergi

Sprøjte Luer-Lok™ Volumen ml	Kanyler Dimensioner G x tommer	Dimensioner udv.Ø x længde mm	Slibevinkel	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
1	27 x 1/2	0,40 x 13	normal	grå	100/400	305945
1	26 x 3/8	0,45 x 10	intradermal	brun	100/400	305946

Materialeindhold

Ansats, beskyttelseshætte og sikkerhedsmekanisme: polypropylen
Kanyler: Rustfrit stål (AISI 304)
Lim: Epoxyresin
Overfladebehandling: Siliconeolie
Cylinder og stempelstang: polypropylen
Pakning: Syntetisk polyisopren (latexfri)
Overfladebehandling: Siliconeolie

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Papir
polyethylen
polyamid
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode
Strålesterilisering



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Integra™ Injektionssprøjte med indtrækkelig BD Integra™ sikkerhedskanyale



- Injektionssprøjte med sikkerhedskanyale – mindsket risiko for stikskader
- Enhåndsaktivering af sikkerhedsmekanisme
- Ved aktivering trækkes nålen ind i sprøjten
- Aftagelig/udskiftelig nål – findes både til aspiration og administration
- BD Tru-lock™ -fitting – umulig at forveksle med gængse Luer-/Luer-Lok™ -fittings
- Minimalt restvolumen
- BD Microlance™ 3 injektionskanyale – unik slibevinkel og poleringsmetode medfører mindre ubehag for patienten



BD Integra™ injektionssprøjte, særskilt emballeret

Volumen ml	Graduering ml	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
3	0,1	100/400	305283

BD Integra™ injektions-/optrækskanyale, særskilt emballeret

Dimensioner G x tommer	Dimensioner udv.Ø x længde mm	Slibevinkel	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
25G x 5/8	0,5 x 16	normal	orange	100/1000	305310
25G x 1	0,5 x 25	normal	orange	100/1000	305311
23G x 1	0,6 x 25	normal	blå	100/1000	305312
22G x 1 ½	0,7 x 40	normal	sort	100/1000	305313
18G x 1 ½	1,20 x 40	stump*	lyserød	100/1000	305275
18G x 1 ½	1,20 x 40	stump, med væskefilter*	lyserød	50/500	305833

* til aspiration, ikke indtrækkelig

BD Integra™, injektionssprøjte 3 ml og injektionskanyale, sampak

Kanyale Dimensioner G x tommer	Dimensioner udv.Ø x længde mm	Slibevinkel	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
25G x 5/8	0,5 x 16	normal	orange	100/400	305269
25G x 1	0,5 x 25	normal	orange	100/400	305270
23G x 1	0,6 x 25	normal	blå	100/400	305271
22G x 1 1/2	0,7 x 40	normal	sort	100/400	305272
21G x 1	0,8 x 25	normal	grøn	100/400	305273
21G x 1 1/2	0,8 x 40	normal	grøn	100/400	305274

Materialeindhold

Beskyttelseshætte, sikkerhedsmekanisme og ydre ansats: polypropylen
Indre ansats: polypropylen
For art.nr. 305275 og 305833 er ansatsen i polycarbonat
Kanyale: Rustfrit stål (AISI 304)
Lim: Epoxyresin
Overfladebehandling: siliconeolie
Cylinder: polypropylen
Indre stempelstang: polypropylen
Ydre stempelstang: polypropylen
Pakning: Syntetisk polyisopren

(latexfri)
Overfladebehandling: Siliconeolie

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Papir
Polyethylen
Polyamid
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode
Strålesterilisering



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF (klasse IIa)




Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Discardit™ II, to-komponentsprøjte



- Solid stempelstang for nem og sikker injicering uden risiko for lækage
- Glasklar plast for kontrol af indhold
- Graveret skalatryk for præcis og sikker dosering
- Stempelstop forhindrer, at stempelstangen trækkes ud
- Ergonomisk udformet stempelstang for sikkert greb

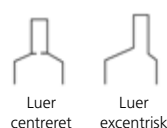

BD Discardit™ II

Volumen ml	Fitting/placering	Graduering ml	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
2	Luer/centreret	0,1	100/3000	300928
5	Luer/excentrisk	0,2	100/1800	309050
10	Luer/excentrisk	0,5	100/1200	309110
20	Luer/excentrisk	1,0	80/960	300296

Materialeindhold

Cylinder: polypropylen
Stempelstang: polyethylen
Overfladebehandling: polyamid

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Papir
Transparent plastfilm
(polyethylen/polyamid)
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse I)




Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Emerald™ 2, 5, 10 ml 3-komponentsprøjte



- Reduceret ressourceforbrug kombineret med høj produktkvalitet
- Minimerer affaldsmængden. BD Emerald har op til 30 % mindre materiale end andre sprøjter*
- Glasklar plastcylinder for kontrol af indhold
- Grønt stempel og graveret skalatryk for præcis og sikker dosering
- Robust stempelring forhindrer, at stempelstangen trækkes ud
- Ergonomisk udformet stempelstang for behageligt greb
- Mærkbar struktur på trykflade for sikker administration
- Produktionen af BD Emerald foregår udelukkende med forbrug af vedvarende energi.

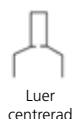

Sprøjter uden kanyler

Volumen ml	Fitting/placering	Graduering/ml	Inder-/trsp.-emb.	Art.nr.
2	Luer/Centreret	0,1	100/3000	307727
3	Luer/centreret	0,1	100/2400	302986
5	Luer/Centreret	0,2	100/2000	307731
10	Luer/Centreret	0,2	100/1200	307736

Sprøjter med aftagelig kanyler

Volumen ml	Kanylestørrelse G X tommer	Kanylestørrelse Yder.Ø X længde mm	Graduering/ml	Farvekode	Inder-/trsp.-emb.	Art. nr.
2	22 x 1 1/4"	0,7 x 30	0,1	Sort	100/2000	307728
2	23 x 1"	0,6 x 25	0,1	Blå	100/2000	307740
2	23 x 1 1/4"	0,6 x 30	0,1	Blå	100/2000	307741
5	21 x 1 1/2"	0,8 x 40	0,2	Grøn	100/1500	307732
5	22 x 1 1/4"	0,7 x 30	0,2	Sort	100/1500	307733
5	23 x 1 1/4"	0,6 x 30	0,2	Blå	100/1500	307735
10	21 x 1 1/2"	0,8 x 40	0,2	Grøn	100/900	307737
10	22 x 1 1/4"	0,7 x 30	0,2	Sort	100/900	307738

Materialeindhold:

Cylinder og stempelstang: polypropylen
Stempel: Latexfri, termoplastisk elastomer (TPE)
Overfladebehandling: silikoneolie
Ansats og kanyelhætte: Polypropylen
Kanyler: Rustfrit stål (AISI 304)
Lim: Epoxyresin
Kanylens overfladebehandling: Silikoneolie

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale:

Papir
Transparent plastfilm
(polyethylen/polyamid)
Bølgepap



Steriliseringsmetode:

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EEC



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

*Baseret på sammenligning med førende mærker på verdensplan. BD 4/11 - 0840

BD Plastipak™ tre-komponentsprøjte 1 ml



Forenklet injektion som følge af færre arbejdsstrin


Sprøjter med fast kanyle

Sprøjter med fast kanyle har minimalt restvolumen mellem kanyle og sprøjte, hvilket medfører følgende fordele:

- mindre risiko for dannelse af luftbobler
- ingen risiko for, at kanylen løsnes fra sprøjten
- større sikkerhed ved administration

Sprøjter med aftagelig kanyle

Sprøjter med aftagelig kanyle giver alle de fordele, som BD Plastipak™ sprøjten og BD Microlance™ 3 kanylen har. Dertil kommer forenklet injektion som følge af færre arbejdsstrin

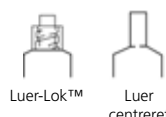

Sprøjter uden kanyle

Volumen ml	Graduering ml	Fitting/ Placering	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
1	0,01	Luer/centreret	100/800	300013
1	0,01	Luer-Lok™/centreret	100/800	309628

Sprøjter med aftagelig kanyle

Volumen ml	Graduering ml	Kanylestørrelse G x tommer	Kanylestørrelse udv.Ø x længde mm	Kanyle Farvekode	Slibevinkel	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
1	0,01	26 x 3/8	0,45 x 10	brun	kort	100/800	300015
1	0,01	25 x 5/8	0,50 x 16	orange	kort	100/800	300014

Sprøjter med fast kanyle

Volumen ml	Graduering ml	Kanylestørrelse G x tommer	Kanylestørrelse udv.Ø x længde mm	Slibevinkel	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
1	0,01	27 x 3/8	0,40 x 10	intradermal	100 (10 posere a 10*)	305502
1	0,01	26 x 1/2	0,45 x 13	normal	100 (10 posere a 10*)	305501

* sterile i lukket pakning a 10

Materialeindhold

Cylinder og stempelstang: polypropylen
Pakning: syntetisk polyisopren (latexfri)
Overfladebehandling: siliconeolie
Luer-Lok™ 1 ml (309628) er fremstillet af polycarbonat og polypropylen
Ansats og beskyttelseshætte: polypropylen
Kanyle: Rustfrit stål (AISI 304)
Lim: Epoxyresin
Overfladebehandling: Siliconeolie

Emballagemateriale

Papir
Transparent plastfilm (polyethylen/polyamid)
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid
(sprøjter med Luer-fitting / sprøjter med aftagelig kanyle)
Strålesterilisering (sprøjter med Luer-Lok™ fitting / sprøjter med fast kanyle)



5 år

**CE-mærkede iht. MDD 93/42/EØF
(Sprøjte uden kanyle: klasse I)
(Sprøjte med kanyle: klasse IIa)**

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com


BD Plastipak™ tre-komponentsprøjte



- Glasklar plast for kontrol af indhold
- Graveret skalatryk for præcis og sikker dosering
- Siliconebehandlet for jævn stempelgang
- Ergonomisk formet stempelstang giver et sikkert greb
- Stempelstop forhindrer, at stempelstangen trækkes ud
- Dobbelt stempelringe forhindrer lækage
- Latexfri emballage fjerner risikoen for overfølsomhedsreaktioner

Sprøjter med aftagelig kanyle

Sprøjter med aftagelig kanyle giver alle de fordele, som BD Plastipak™ sprøjten og BD Microlance™ 3 kanylen har. Dertil kommer forenklet injektion som følge af færre arbejdsstrin

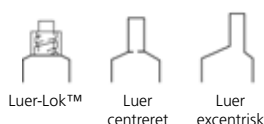

Sprøjter uden kanyle

Volumen ml	Fitting/placering	Graduering ml	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
2/2,5	Luer/centreret	0,1	100/800	300185
5	Luer/centreret	0,2	100/400	302187
10	Luer/excentrisk	0,5	100/400	302188
3	Luer-Lok™/centreret	0,1	200/800	309658
5	Luer-Lok™/centreret	0,2	125/500	309649
10	Luer-Lok™/centreret	0,2	100/400	300912

Materialeindhold

Cylinder og stempelstang: polypropylen
Pakning: Syntetisk polyisopren (latexfri)
Overfladebehandling: siliconeolie
Ansats og beskyttelseshætte: polypropylen
Kanyle: rustfrit stål (AISI 304)
Lim: epoxyresin
Overfladebehandling: siliconeolie

Emballagemateriale

Papir
Transparent plastfilm
(polyethylen/polyamid)
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid (sprøjter med Luer-fitting /
sprøjter med kanyle)
Strålesterilisering (sprøjter med
Luer-Lok™-fitting)



5 år

**CE-mærkede iht. MDD 93/42/EØF
(Sprøjte uden kanyle: klasse I)
(Sprøjte med kanyle: klasse IIa)**

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com


BD Plastipak™ 20, 30, 50, 100 ml, tre-komponentsprøjte



- Glasklar plast for kontrol af indhold
- Graveret skalatryk for præcis og sikker dosering
- Siliconebehandlet for jævn stempelgang
- Ergonomisk udformet stempelstang for sikkert greb
- Stempelstop forhindrer, at stempelstangen trækkes ud
- Dobbelt stempelringe forhindrer lækage
- Ingen lækage selv ved højt tryk
- 100-ml-sprøjten med kateterspids kan ændres til Luer-fitting ved hjælp af en medfølgende adapter
- Den ravgule 50-ml-sprøjte beskytter lysfølsomme lægemidler
- Latexfri emballage eliminerer risikoen for overfølsomhedsreaktioner

Anvendelse

- 50-ml-Luer-Lok™ -sprøjterne er specielt udformede til automatiske sprøjtepumper og passer til de mest udbredte sprøjtepumper på markedet (se kompatibilitetslisten i appendiks)

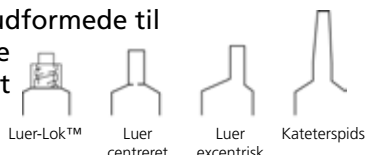

Sprøjter uden kanyler

Volumen ml	Fitting/placering	Graduering ml	Inder-/trsp.-emb.	Art.nr.
20	Luer/excentrisk	1	60/240	301183
20	Luer/excentrisk	1	120/480	300613
30	Luer/excentrisk	1	60/240	301231
50	Luer/excentrisk	1	60/240	300866
20	Luer-Lok™/centreret	1	60/240	301189
20	Luer-Lok™/centreret	1	120/480	300629
30	Luer-Lok™/centreret	1	60/240	301229
50	Luer-Lok™/centreret	1	60/240	300865
60	Luer-Lok™/centreret	1	40/160	309653
50 perfusion	Luer-Lok™/centreret	1	50/100	300137
50 ravgul	Luer-Lok™/centreret	1	60/240	300869
50 perfusion ravgul	Luer-Lok™/centreret	1	50/100	300139

Sprøjter med Kateterspids

Volumen ml	Fitting/placering	Graduering ml	Inder-/trsp.-emb.	Art.nr.
50	Kateterspids/centreret	1	60/240	300867
100	Kateterspids/centreret	2	25/50	300605

Sprøjter med aftagelig kanyler

Volumen ml	Kanylestørrelse G x tommer	Graduering ml	Inder-/trsp.-emb.	Art.nr.
50 perfusion	14 x 1 1/4	1	50/100	300136
50 perfusion ravgul	14 x 1 1/4	1	50/100	300138

Materialeindhold

Cylinder og stempelstang: polypropylen
 Pakning: syntetisk polyisopren (latexfri)
 Overfladebehandling: siliconeolie
 Ansats og beskyttelseshætte: polypropylen
 Kanyler: rustfrit stål (AISI 304)
 Lim: epoxyresin
 Overfladebehandling: siliconeolie

Emballagemateriale

Papir
 Transparent plastfilm
 (polyethylen/polyamid)
 Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
 (sprøjte Luer: klasse I)
 (sprøjte Luer-Lok™: klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Medical Surgical Systems BD Danmark
 Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
 2620 Albertslund
 Tlf.: 43 43 45 66
 www.bd.com

BD™ insulinsprøjte med/uden sikkerhedsmekanisme



- Latexfri emballage fjerner risikoen for overfølsomhedsreaktioner
- Graveret skalatryk for præcis og sikker dosering
- Alle insulinsprøjter har fast kanyler for større sikkerhed og mindre affald
- Komplet sortiment af insulinsprøjter
- Nu også med sikkerhedskanyler, der mindsker risikoen for stikskader



BD Micro-Fine+™ insulinsprøjte med fast kanyler

Sprøjte volumen ml/enhed	Sprøjte graduering ml	Kanylestørrelse G x tommer	Kanylestørrelse udv.Ø x længde mm	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
0,3/30	0,005	30G x 5/16	0,30 x 8	100 (10 posere a 10)/500	324826
0,5/50	0,005	30G x 5/16	0,30 x 8	100 (10 posere a 10)/500	324825
0,5/50	0,005	29G x 1/2	0,33 x 12,7	100 (10 posere a 10)/500	324824
1,0/100	0,02	29G x 1/2	0,33 x 12,7	100 (10 posere a 10)/500	324827



BD SafetyGlide™ TNT, insulinsprøjte med sikkerhedskanyler

Sprøjte volumen ml	Sprøjte graduering ml	Kanylestørrelse G x tommer	Kanylestørrelse udv.Ø x længde mm	Kanylens væg	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
0,3	0,01	31G x 5/16	0,25 x 8	tynd	100/400	305937
0,5	0,01	30G x 5/16	0,30 x 8	tynd	100/400	305934
0,5	0,01	29G x 1/2	0,33 x 13	normal	100/400	305932
1,0	0,01	29G x 1/2	0,33 x 13	normal	100/400	305930

Materialeindhold

Sprøjte:
Cylinder og stempelstang: polypropylen
Pakning: Syntetisk polyisopren (latexfri)
Kanyler: Rustfrit stål (AISI 304)
Beskyttelseshætte: polyethylen
Lim: Epoxyresin
Overfladebehandling: Siliconeolie

Emballagemateriale

polyethylen
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Gammastråling



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD AutoShield Duo™ Penkanyle med automatisk bestyttelseskærm



- Den første sikkerhedspenkanyle, der giver beskyttelse i begge kanyle ender. Begge skjolde låses automatisk efter injektion for at forhindre stikskader fra begge ender af kanylen.
- 5 mm sikkerhedspenkanylen reducerer risikoen for intramuskulære injektioner.
- Kan anvendes af alle mennesker med diabetes.
- Kanylen er skjult for at medvirke til en mindre smertefuld oplevelse.
- Kompatibel med alle penne der anvendes til diabetes behandling.



Beskrivelse	Kanylestørrelse ydre diameter x længde	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
BD AutoShields™ Duo Penkanyle	30 G x 0,30 mm / 0,30 mm x 5 mm	100/800	329605
BD AutoShields™ Duo Penkanyle	30 G x 0,30 mm / 0,30 mm x 8 mm	100/800	329608

Materialeindhold

Udvendig skærm: Polyætylen
Hvid muffe: Polycarbonat, blæk (BD logo)
Klar udvendig skærm: Polycarbonat
Indvendig skærm:
Polycarbonat, blæk (indicator bånd)
Kanyle: Rustfri stål & overfladebehandling
Lim: Ultraviolet Cure Adhesive
Fjerder: Rustfri stål
Nav: Polypropylen
Mellem indre skjold og navet: Silikone fedt
Beskyttet ende på pennen:
Polycarbonat, farver (orange)
Label: papir/copolymer film

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Gammastråling



3 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Micro-Fine+™ injektionspen



BD Micro-Fine+™ injektionspenne

- Komplet sortiment af injektionspenne til alle diabetikere
- Benyttes og passer til alle typer insulinpenne fremstillede efter august 2003
- Designede med såkaldt "thin wall"-teknologi, der medfører større indvendig diameter end tidligere
- Slebet med speciel teknik, poleret og siliconebelagt for at mindske smerten ved nålestikket



Kanylestørrelse G x mm	Kanylestørrelse mm	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
32G x 4	0,23 x 4	100/1200	320636
31G x 5	0,25 x 5	100/1200	320635
31G x 8	0,25 x 8	100/1200	320634
29G x 12,7	0,33 x 12,7	100/1200	320216

Materialeindhold

Kanyle: rustfrit stål (AISI 304)
Overfladebehandling: siliconeolie
Ansats: polypropylen
Beskyttelseshætte: polyethylen + folie-
papir
Lim: epoxy

Indeholder ikke PVC, phthalater eller
latex

Emballagemateriale

Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Gammastråling



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD™ oralsprøjte



- Latexfri emballage fjerner risikoen for overfølsomhedsreaktioner
- Oralsprøjterne er forsynede med en fitting noget større end en Luer-tilslutning, for at forebygge risikoen for at tilslutte en injektionskanyler
- Ravgule sprøjter beskytter lysfølsomme lægemidler
- Oralsprøjten leveres med særskilt emballeret beskyttelseshætte
- Udelukkende til oral brug



Volumen ml	Farve	Graduering ml	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
1	ravgul	0,02	100/500	305207
3	ravgul	0,1	100/500	305210
5	ravgul	0,2	100/500	305208
10	ravgul	0,2	100/500	305209
1	glasklar	0,02	100/500	305217
3	glasklar	0,1	100/500	305220
5	glasklar	0,2	100/500	305218
10	glasklar	0,2	100/500	305219

Materialeindhold

Cylinder og stempelstang:
polypropylen
Pakning: syntetisk polyisopren (latexfri)
Overfladebehandling: siliconeolie

Indeholder ikke PVC, phthalater eller
latex

Emballagemateriale

Polyethylenpose
Karton
Bølgepap

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse I)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD™ Sharps-container, beholder til stikkende/skærende risikoaffald



Størrelse 1,5 l, 3 l, 5 l og 7 l

- Låg designet for nem tillukning (midlertidig og endelig)
- Udstyret med håndtag for sikker flytning/transport
- Beholderne er designede, så de står sikkert
- Udformet med henblik på at optage mindst mulig plads ved opbevaring både før og efter brug
- Låget er udstyret med kanyleadskiller

Alle størrelser

- Åbningen er udformet med henblik på at forebygge at deponeret materiale falder ud, hvis beholderen vælter
- Opfylder en række standarder som anført nedenfor samt i appendiks 2
- Tydelig mærkning
- Der findes holdere og beslag til de forskellige beholdere til brug på bord, væg eller medicinvogn jævnfør oplysningerne på det særskilte produktblad



BD™ Sharps-beholder

Beskrivelse	Dimensioner Volumen l	Opfylder standarder	Trsp.emb.	Art.nr.
Lommeformat	0,45	UN/BSI/NF	100	302434
Kvadratisk, stabelbar	0,87	NF	50	367202
Rund, stabelbar	1,5	UN/BSI/NF	40	305624
Rund, stabelbar	3	UN/BSI/NF	25	305625
Rektangulær, stabelbar	5	UN/BSI/NF	20	305626
Rektangulær, stabelbar	7	UN/BSI/NF	16	305627
Rektangulær, stabelbar	22,7	UN/BSI/NF	12	300479

Materialeindhold

Polypropylen

Emballagemateriale

Bølgepap

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Ikke CE-mærket – ikke omfattet af MDD 93/42/EØF



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD™ Sharps Container, beholder til stikkende/skærende risikoaffald – holder/monteringsbeslag



Til de forskellige beholdere findes holdere og beslag tilpasset til brug på bord, væg eller medicinvogn som anført nedenfor



Holder til montering på bord/væg

Holder til ophængning

BD™ Sharps-holder og adaptere

Beskrivelse	Beregnet til beholder, volumen, l	Trsp.emb.	Art.nr.
Plastkop til montering på bord	0,45	50	305964
Metalkop til montering på bord	0,87	50	305970
Metalholder til montering på bord eller væg	1,5	6	305645
Metalholder til ophængning	1,5	6	305710
Metalholder til montering på bord eller væg	3	6	305250
Metalholder til ophængning	3	6	305251
Metalholder til montering på bord eller væg	5	6	305253
Metalholder til ophængning	5	6	305252
Metalholder til montering på bord eller væg	7	6	305255
Metalholder til ophængning	7	6	305254
Adapter til montering af holder (vandret eller lodret) på medicinvogn eller dropstativ	1,5/3/5/7	6	305636

Materialeindhold

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Bølgepap

Ikke CE-mærket – ikke omfattet af MDD 93/42/EØF



Helping all people live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD PosiFlush™, forfyldt NaCl-sprøjte til skylning



- Sprøjte forfyldt med NaCl 9 mg/ml
- Beregnet til skylning af IV-katetre
- Færdigmærket, hvilket mindsker risikoen for lægemiddelforveksling
- Letter aseptisk håndtering – overflødig gør manuel aspiration og mindsker risikoen for krydskontaminering
- Mindsker risikoen for kateterskade, idet sprøjtediameteren, der svarer til en 10-ml-sprøjte, forhindrer for højt skylletryk
- Udformet med henblik på at mindske risikoen for blodtilbageløb ved skylning
- Forenkler skylleproceduren – tidsbesparende og effektiv
- Findes i 2 forskellige udgaver, model SP og model XS (se nedenfor)

Bemærk! BD PosiFlush™ er medicoteknisk udstyr, der udelukkende er beregnet til skylning af IV-katetre. Den må derfor ikke benyttes til blanding af tørre substanser eller fortynding af medicin.



BD PosiFlush™ SP, steril infusionsbane og ren yderside i topkvalitet (Kan benyttes ved al skylning bortset fra skylning i steril felt)

Sprøjte Luer-Lok™ volumen ml	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
3	30/480	306573
5	30/480	306574
10	30/480	306575

BD PosiFlush™ XS, ind- og udvendigt steril (Kan benyttes ved al skylning, dvs. også i steril felt)

Sprøjte Luer-Lok™ volumen ml	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
3	30/240	306570
5	30/240	306571
10	30/240	306572

Materialeindhold

Cylinder og stempelstang: polypropylen
Pakning: syntetisk polyisopren (latexfri)
Overfladebehandling: siliconeolie
Prop: polypropylen
Opløsning: NaCl 9 mg/ml

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Papir
Polyethylen
Polyester
Polypropylen
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Dampsterilisering



3 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EEF
(klasse III)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Venflon™ infusionskanyle



- Infusionskanyle med injektionsport
- Back-cut-slebet stålkanylen og affaset kateterspids for sikker punktur og jævn indlægning med minimal risiko for veneperforation
- Fleksible vinger – blide mod huden
- PTFE-kateter
- Farvekodet iht. ISO-standard



Kateter G	Kateter udv.Ø mm	Kateter længde mm	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
22G	0,8	25	blå	50/500	391451
20G	1,0	32	lyserød	50/500	391452
18G	1,2	32	grøn	50/500	391457
18G	1,2	45	grøn	50/500	391453
17G	1,4	45	hvid	50/500	391454
16G	1,7	45	grå	50/500	391455
14G	2,0	45	orange	50/500	391456

Materialeindhold

Kanyle: rustfrit stål
Kateter: polytetrafluorethylen
Øvrige dele: polycarbonat,
polypropylen, polyethylen,
silicone, siliconeolie

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Infusionskanyle:
Tyvek-laminat
Polyester
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Venflon™ Pro infusionskanyle



- Infusionskanyle med injektionsport
- Back-cut-slebet stålkanyle og formstøbt kateterspids for sikker punktur og jævn indlægning, med minimal risiko for veneperforation
- Fleksible vinger – blide mod huden
- Injektionsport med snaplåg, der medfører minimal risiko for kontaminering
- Udstyret med BD Vialon™ røntgenfast polyurethankateter, der bliver blødt, når det er anlagt i venen, hvilket mindsker risikoen for mekanisk venebetændelse
- Farvekodet iht. ISO-standard



Kateter G	Kateter udv.Ø mm	Kateter længde mm	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
22G	0,9	25	blå	50/500	393202
20G	1,1	32	lyserød	50/500	393204
18G	1,3	32	grøn	50/500	393206
18G	1,3	45	grøn	50/500	393207
17G	1,5	45	hvid	50/500	393208
16G	1,8	45	grå	50/500	393209
14G	2,0	45	orange	50/500	393210

Materialeindhold

Kanyle: rustfrit stål
Kateter: polyurethan BD Vialon™,
bariumsulfat
Øvrige dele: polyetherimid,
polypropylen, polyethylen,
silicone, siliconeolie
Mandrin: polypropylen, polyethylen

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Infusionskanyle:
Tyvek-laminat
Polyester
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Strålesterilisering



3 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Venflon™ Pro Safety infusionskanyler med sikkerhedsmekanisme



- BD Venflon™ Pro Safety er en perifer IV-sikkerhedskanyler, der giver de samme klinisk dokumenterede fordele som BD Venflon™ Pro:
- Back-cut-slebet stålkanyler og formstøbt kateterspids for sikker punktur og jævn indlægning
- Udstyret med BD Vialon™ røntgenfast polyurethankateter, der bliver blødt, når det er anlagt i venen, hvilket mindsker risikoen for mekanisk venebetændelse
- Injektionsventil med snaplåg for sikker og nem håndtering
- Fleksible vinger – blide mod huden

BD Venflon™ Pro Safety er desuden forsynet med en avanceret sikring, der beskytter behandlerne mod blodbårne patogener som følge af blodeksponering eller stik- og snitskader:

- Kanylehætte fremstillet i plast uden skarpe kanter, der efter aktivering omslutter hele kanylen. Udformet, så sundhedspersonale ikke stikker eller skærer sig på hverken nålespids eller sikring
- Kanylehætte i unikt design, der indkapsler overskydende blod og minimerer risikoen for kontakt med blod ved aktivering af infusionskanyler



Kateter G	udv.Ø mm	Længde mm	Farvekode	Inder-/trsp.emb.	Art.nr.
22G	0,9	25	blå	50/500	393222
20G	1,1	32	lyserød	50/500	393224
18G	1,3	32	grøn	50/500	393226
18G	1,3	45	grøn	50/500	393227
17G	1,5	45	hvid	50/500	393228
16G	1,8	45	grå	50/500	393229
14G	2,0	45	orange	50/500	393230



reddot design award
best of the best 2008

BD og BD Venflon™ Pro Safety infusionskanyler med sikkerhedshætte mekanisme blev i marts 2008 tildelt designprisen: "red dot: best of the best". Red dot designprisen gives til enestående designkvalitet og nytænkning inden for en lang række brancher og produkttyper. En international dommerkomité udpeger vinderne af på baggrund af en detaljeret bedømmelse af forskellige kriterier som innovation, funktionalitet, ergonomi, levetid, miljøvenlighed og brugervenlighed.

Materialeindhold

Kanyler: rustfrit stål
Kateter: polyurethan BD Vialon™, bariumsulfat
Øvrige dele: polyetherimid, polypropylen, polyethylen, polyester, silicone, siliconeolie
Mandrin: polypropylen, polyethylen

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Infusionskanyler:
Tyvek-laminat
Polyester
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Strålesterilisering



3 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Neoflon™ infusionskanyle



- Infusionskanyle uden injektionsport
- Specielt beregnet til punktur af små og skøre kar inden for pædiatrien og geriatrien
- Back-cut-slebet stålkanyler og affaset kateterspids for sikker punktur og jævn indlægning, med minimal risiko for veneperforation
- Ekstra fingergreb for sikker anlæggelse
- Fleksible vinger – blide mod huden
- PTFE-kateter
- Farvekodet iht. ISO-standard



Kateter G	udv.Ø mm	Længde mm	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
26G	0,6	19	lilla	50/500	391349
24G	0,7	19	gul	50/500	391350

Materialeindhold

Kanyle: rustfrit stål
Kateter: polytetrafluorethylen
Øvrige dele: polycarbonat
polypropylen, polyethylen
Siliconeolie

Emballagemateriale

Tyvek-laminat
Polyester
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Insyte-N™ / BD Insyte-W™ Infusionskanyler



- Infusionskanyler uden injektionsport
- Back-cut-slebet stålkanyler og formstøbt kateterspids for sikker punktur og jævn indlægning
- Udstyret med BD Vialon™ røntgenfast polyurethankateter, der bliver blødt, når det er anlagt i venen, hvilket mindsker risikoen for mekanisk venebetændelse
- BD Insyte-W™ har fleksible vinger for at skåne huden
- BD Insyte-N™ med vinger er udstyret med et vindue ved stålkanylens spids for ekstra hurtigt tilbageløb og umiddelbar kontrol af korrekt position i venen
- Farvekodet iht. ISO-standard



Kateter G	udv.Ø mm	Længde mm	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
24G	0,7	14	gul	50/200	381311
24G	0,7	19	gul	50/200	381312
22G	0,9	25	blå	50/200	381323
20G	1,1	30	lyserød	50/200	381334
20G	1,1	45	lyserød	50/200	381337
18G	1,3	30	grøn	50/200	381344
18G	1,3	45	grøn	50/200	381346
16G	1,7	45	grå	50/200	381357

Materialeindhold

Kanyler: rustfrit stål
Kateter: polyurethan BD Vialon™, bari-
umsulfat
Øvrige dele: polypropylen,
siliconeolie, polypropionat

Indeholder ikke PVC, phthalater eller
latex

Emballagemateriale

Infusionskanyler:
Tyvek-laminat
Polyethylen
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode
Ethylenoxid



5 år

**CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)**



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Insyte-N™ Autoguard™ og BD Insyte-W™ Autoguard™ infusionskanyler med sikkerhedsmekanisme



- Infusionskanyler uden injektionsport
- Udstyret med sikkerhedsmekanisme, der aktiveres ved tryk på en knap, der er anbragt på kateterhuset
- Når knappen trykkes ind, trækkes kanylen tilbage i en beskyttende cylinder.
- Back-cut-slebet stålkanyler og formstøbt kateterspids for sikker punktur og jævn indlægning
- Udstyret med BD Vialon™ røntgenfast polyurethankateter, der bliver blødt, når det er anlagt i venen, hvilket mindsker risikoen for mekanisk venebetændelse
- Fleksible vinger – blide mod huden
- Farvekodet iht. ISO-standard
- De mindre størrelser er udstyrede med et vindue for direkte kontrol af korrekt position i venen (20G, 22G og 24G)
- BD Insyte-N™ Autoguard™ er kun 14 mm langt og beregnet til de allertyndeste vener



Kateter G	udv.Ø mm	Længde mm	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
24G	0,7	14	gul	50/200	381911
24G	0,7	19	gul	50/200	381912
22G	0,9	25	blå	50/200	381923
20G	1,1	25	lyserød	50/200	381933
20G	1,1	32	lyserød	50/200	381934
20G	1,1	51	lyserød	50/200	381937
18G	1,3	32	grøn	50/200	381944
18G	1,3	51	grøn	50/200	381947
16G	1,7	32	grå	50/200	381954
16G	1,7	51	grå	50/200	381957

Materialeindhold

Kanyler: rustfrit stål
Kateter: polyurethan BD Vialon™, bariumsulfat
Øvrige dele: polypropylen, polycarbonat, siliconeolie

Emballagemateriale

Tyvek-laminat
Polyethylen
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



3 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Nexiva™ lukket IV-katetersystem – med Y-kobling



BD Nexiva™ er et lukket, perifert IV-katetersystem beregnet til at mindske risikoen for stikskader og blodeksposering ved anlæggelsen. En passiv sikkerhedsanordning beskytter mod stikskader, mens det lukkede system med integreret slange, der holder blodet inde i udstyret, mindsker risikoen for mikrobiel kontaminering og infektion.

- Det integrerede IV-system har lukket væskebane, der forhindrer blod-udsivning og mindsker risikoen for kontaminering og blodeksposering. Manipuleringen foregår på afstand fra indstiksstedet, hvilket mindsker risikoen for mekanisk venebetændelse
- BD Q-syte™ split septum desinficerbar membran har ingen interne komponenter, der tillader vækst af patogene mikroorganismer.¹ En membran af split-septum-typen mindsker risikoen for kateterrelaterede infektioner i blodbanen med op til 70 % sammenlignet med en mekanisk ventil.^{2,3}
- Udstyret med BD Vialon™ biomateriale, røntgenfast polyurethankateter, der bliver op til 70 % blødere i karret, hvilket klinisk dokumenteret, mindsker risikoen for mekanisk venebetændelse med op til 50 %.^{4,5}
- Via et udstanset vindue i nålen, BD Instaflash™, opnås et umiddelbart blodsvar, der bekræfter, at kanylen spidsen befinder sig inde i blodkarret
- De fleksible, bløde vinger er designede med henblik på at lette sikker fiksering, der minimerer risikoen for dislokering af kateteret og dermed forebygger kateterkomplikationer.



BD Nexiva™ lukket IV-katetersystem findes i forskellige konfigurationer, nedenfor med Y-kobling og dobbelt (2x) BD Q-Syte™ split septum:

BD Nexiva™ lukket IV-katetersystem med Y-kobling og BD Q-Syte™ 2x split septum

Kateter	udv.Ø mm	Længde mm	Flow H ₂ O (ml/min)	Farvekode	Inder-/trsp.emb.	Art.nr.
24G	0,7	19	18	gul	20/80	383531
22G	0,9	25	33	blå	20/80	383532
20G	1,1	25	61	lyserød	20/80	383536
20G	1,1	32	58	lyserød	20/80	383537
18G	1,3	32	84	grøn	20/80	383539

Materialeindhold

Kanyle: rustfrit stål
Kateter: polyurethan BD Vialon™
Øvrige dele: polypropylen, polycarbonat, polyisopren, silicone, siliconeolie

Emballagemateriale

Tyvek-laminat
Polyester
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



3 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF (klasse IIa)

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

1) Karchmer TB, Wood C, Ohl CA, et al. Contamination of mechanical valve needleless devices may contribute to catheter-related bloodstream infections. SHEA 2006 Presentation Number: 221 Poster Board Number: 47.
2) Salgado CD, et al. Increased rate of catheter-related bloodstream infection associated with use of a needleless mechanical valve device at a long-term acute care hospital. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2007;28.
3) Rupp ME, et al. Outbreak of bloodstream infection temporally associated with the use of an intravascular needleless valve. Clinical Infectious Diseases. 2007;44.
4) Maki D, Ringer, M. Risk factors for infusion-related phlebitis with small peripheral venous catheters. Annals of Internal Medicine. 1991;114:845-854.
5) Ikke-publicerede data.



Helping all people live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Nexiva™ lukket IV-katetersystem – med Connecta trevejshane



BD Nexiva™ er et lukket, perifert IV-katetersystem beregnet til at mindske risikoen for stikskader og blodeksponering ved anlæggelsen. En passiv sikkerhedsanordning beskytter mod stikskader, mens det lukkede system med forkoblet slange, der holder blodet inde i anordningen, mindsker risikoen for mikrobiel kontaminering og infektion.



- Det formonterede IV-system har lukket væskebane, der forhindrer blod-udsivning og mindsker risikoen for kontaminering og blodeksponering. Manipuleringen foregår på afstand fra indstiksstedet, hvilket mindsker risikoen for mekanisk venebetændelse
- BD Q-syte™ split septum desinficerbar membran har ingen interne komponenter, der tillader vækst af patogene mikroorganismer.¹ En membran af split-septum-typen mindsker risikoen for kateterrelaterede infektioner i blodbanen med op til 70 % sammenlignet med en mekanisk ventil.^{2,3}
- Udstyret med BD Vialon™ biomateriale, røntgenfast polyurethankateter, der bliver op til 70 % blødere i karret, hvilket klinisk dokumenteret, mindsker risikoen for mekanisk venebetændelse med op til 50 %.^{4,5}
- Via et udstanset vindue i nålen, BD Instaflash™, opnås et umiddelbart blodsvar, der bekræfter, at kanylen spidsen befinder sig inde i blodkarret
- De fleksible, bløde vinger er designede med henblik på at lette sikker fiksering, der minimerer risikoen for at rykke kateteret ud af dets placering og dermed forebygger kateterkomplikationer.

BD Nexiva™ lukket IV-katetersystem findes i forskellige udførelser. Nedenfor med BD Connecta™ trevejshane og BD Q-Syte™ split septum samt i udgave med BD Connecta™ trevejshane og sterile propper:

BD Nexiva™ lukket IV-katetersystem med trevejshane og BD Q-Syte™ split septum

Kateter	udv.Ø mm	Længde mm	Flow H ₂ O ml/min	Farvekode	Inder-/trsp.emb.	Art.nr.
24G	0,7	19	18	gul	20/80	383661
22G	0,9	25	33	blå	20/80	383662
20G	1,1	25	61	lyserød	20/80	383666
20G	1,1	32	58	lyserød	20/80	383667
18G	1,3	32	84	grøn	20/80	383669

BD Nexiva™ lukket IV-katetersystem med trevejshane og Luer-Lok™-prop

Kateter	udv.Ø mm	Længde mm	Flow H ₂ O ml/min	Farvekode	Inder-/trsp.emb.	Art.nr.
24G	0,7	19	18	gul	20/80	383681
22G	0,9	25	33	blå	20/80	383682
20G	1,1	32	58	lyserød	20/80	383687
18G	1,3	32	84	grøn	20/80	383689

Materialeindhold

Kanylen: rustfrit stål
Kateter: polyurethan BD Vialon™
Øvrige dele: polypropylen, polycarbonat, polyisopren, silicone, siliconeolie

Emballagemateriale

Tyvek-laminat
Polyester
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



3 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF (klasse IIa)

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

1) Karchmer TB, Wood C, Ohl CA, et al. Contamination of mechanical valve needleless devices may contribute to catheter-related bloodstream infections. SHEA 2006 Presentation Number: 221 Poster Board Number: 47.
2) Salgado CD, et al. Increased rate of catheter-related bloodstream infection associated with use of a needleless mechanical valve device at a long-term acute care hospital. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2007;28.
3) Rupp ME, et al. Outbreak of bloodstream infection temporally associated with the use of an intravascular needleless valve. Clinical Infectious Diseases. 2007;44.
4) Maki D, Ringer, M. Risk factors for infusion-related phlebitis with small peripheral venous catheters. Annals of Internal Medicine. 1991;114:845-854.
5) Ikke-publicerede data.



Helping all people live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Nexiva™ Diffusics™ Lukket integreret IV-katetersystem til injektion af kontraststof ved højt tryk



BD Nexiva Diffusics er et innovativt supplement, til det allerede afprøvede og effektive IV-katetersystem, BD Nexiva. Det er et lukket integreret IV-katetersystem, udviklet specifikt til radiologisk brug. Systemet har en formonteret slange, minimerer risiko for blodeksponering og stikskader, giver en øget stabilitet og fremmer anlæggelsen med BD Instaflash™ nåleteknologi.

BD Nexiva Diffusics har tre laserskårne, dråbeformede huller med placering i kateterspidsen for at maksimere spredningen af kontraststoffet ind i venen.

Designet fungerer ved at reducere intensiteten af det flow, der kommer ud af kateterspidsen, hvilket kan mindske belastningen på venevæggen.



- Integreret design udviklet til trykinjektorsprøjtes indstilling på op til 325 psi
- Nu kan endnu mindre størrelser på IV-katetre (22 & 24G) imødekomme kravene i protokollerne
- Reducerer de kræfter, der kan få kateteret til at flytte sig i venen³
- Betydelig mindre påvirkning af venen under injektion med højt tryk⁴
- Reduceret blodeksponering under IV-kanylering⁵
- Den passive sikkerhedsmekanisme beskytter mod stikskader
- Udstyret med BD Vialon™ biomateriale, røntgenfast polyurethankateter, der bliver op til 70 % blødere i karret, hvilket klinisk dokumenteret, mindsker risikoen for mekanisk venebetændelse med op til 50 %.^{4,5}
- Via et udstanset vindue i nålen, BD Instaflash™, opnås et umiddelbart blodsvar
- Fleksible, bløde vinger designet med henblik på at lette sikker fiksering

Gauge størrelse	Kateter-diameter mm	Kateterlængde mm	Flowrate (ml/h)	Anbef. Maks. CT flowrate (22°C)	Anbef. Maks. CT flowrate (37°C) ³	Farvekode	Antal æske/karton	Reference-nummer
24	0,7	19	1235	3.0 ml/sek	3.0 ml/sek	Gul	20/80	383691
22	0,9	25	2690	4.0 ml/sek	6.5 ml/sek	Blå	20/80	383692
20	1,1	25	4050	5.5 ml/sek	7.5 ml/sek	Rosa	20/80	383693
20	1,1	32	3850	5.0 ml/sek	6.5 ml/sek	Rosa	20/80	383694
18	1,3	32	5400	5.5 ml/sek	7.0 ml/sek	Grøn	20/80	383695

* Den anførte flowrate på lueradapteren (se billede ovenfor), angiver max.-flowrate for Omnipaque 350 ved både 37 °C og 22 °C. Kontakt venligst BD for anbefalede flowrates på andre kontrastmidler.

Materialeindhold

Kanyler: rustfrit stål
Kateter: polyurethan BD Vialon™
Øvrige dele: polypropylen, polycarbonat, polyisopren, silicone, siliconeolie

Emballagemateriale

Tyvek-laminat
Polyester
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



3 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF (klasse IIa)

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

1. An In-vitro Study Measuring IV Catheter Recoil Forces During Power Injection of Iodinated Contrast Media. BD Medical. 2011
2. An In-vitro Assessment of Diffuser Efficiency During Power Injection of Iodinated Contrast Media using BD Nexiva™ Diffusics™. BD Medical. 2011.
3. Bausone-Gazda D, Lefaiver C, Walters S. "A randomized controlled trial to compare the complications of 2 peripheral intravenous catheter stabilization systems. J Infus Nurs. 2010;33(6):371-384.
4) Maki D, Ringer, M. Risk factors for infusion-related phlebitis with small peripheral venous catheters. Annals of Internal Medicine. 1991;114:845-854.
5) Data on file.



Helping all people live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Vecafix™ og BD Veca-C™ infusionsplaster



- BD Veca-C™ og Vecafix™ er sterile infusionsplastre til optimal fiksering af infusionskanyler
- BD Veca-C™ og Vecafix™ beskytter indstiksstedet og lader huden ånde
- Sårkompresset opsuger eksudat, der kan opstå ved indstiksstedet, og holder det samtidig tørt
- Indeholder desuden et kompres, der anbringes under infusionskanylens vinger for øget patientkomfort
- BD Veca-C™ er desuden udstyret med et transparent vindue af polyurethan, der letter inspektion af den anlagte infusionskanyle for at forebygge blodpropper og venebetændelse



Produktbeskrivelse

Inder-/trsp.- emb.

Art.nr.

BD Veca-C™

50/600

392020

BD Vecafix™

50/600

392015

Materialeindhold

Polyester, aluminium,
siliconebelagt papir,
bomuld, polyurethan (Veca-C™)

Indeholder ikke PVC, phthalater eller
latex

Emballagemateriale

Papir
Karton
Bølgepap
Latex



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse I)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Q-Syte™ split septum



BD Q-Syte™ er en desinficerbar membran af split-septum-typen. BD Q-Syte™ split septum kobles til IV-linjen for at mindske risikoen for mikrobiel kontaminering og give en mere sikker infusionsbehandling.

Ved at lukke IV-systemet øges sikkerheden for både patienter og sundhedspersonale. En membran af split-septum-typen mindsker risikoen for kateterrelaterede infektioner i blodbanen med op til 70 % sammenlignet med en mekanisk ventil.^{1,2}

BD Q-Syte™ split septum:

- har en lige væskebane uden interne komponenter for at forebygge bakterievækst
- har en glat og jævn overflade, der er nem at desinficere
- er lille og let og forøger vægten af IV-linjen minimalt
- tillader stort flow ved behov for hurtig administration

BD Q-Syte™ er desuden fremstillet af et transparent plastmateriale for bedre kontrol af væskeflow og nemmere skylning.

Findes i en række forskellige udgaver og modeller samt som en integreret del af BD Nexiva™ lukket IV-katersystem.

Det amerikanske CDC (Center for Disease Control and Prevention) udgav i 2011 ny retningslinjer for forebyggelse af intravaskulære kateterrelaterede infektioner, hvori specifikt anbefales brug af en desinficerbar membran af split-septum-typen frem for bestemte modeller mekaniske ventiler pga. den højere infektionsrisiko ved brug af sidstnævnte.



Produktbeskrivelse	Fyldevolumen (ml)	Flow H ₂ O (ml/min)	Inder-/trsp.-emb.	Art.nr.
BD Q-Syte™ uden slange	0,10	525	50/200	385100
BD Q-Syte™ med 15 cm makroslange	1,14	445	25/200	385101
BD Q-Syte™ med 15 cm mikroslange *	0,21	49	50/200	385102
BD Q-Syte™ med 15 cm mikroslange	0,21	49	50/50	385151
BD Q-Syte™ med 15 cm dobbelt makroslange	1,60	445	50/50	385161
BD Q-Syte™ med 15 cm tredobbelt makroslange	2,25	445	50/50	385162
BD Q-Syte™ med 15 cm dobbelt mikroslange	0,45	49	50/50	385163
BD Q-Syte™ med 15 cm tredobbelt mikroslange	0,80	49	50/50	385164
BD Connecta™ Q-Syte™ trevejsbane	0,31	390	50/500	394501
BD Q-Syte™ optrækskanyler	0,10	525	25/100	385108

* indeholder DEHP

Materialeindhold

Polycarbonat
Silicone
Polyvinylchlorid (BD Q-Syte med forlængerslange)

Emballagemateriale

Papir
Polyethylen
Polyamid
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid
Strålingssterilisering (394501)



3 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)

Indeholder ikke phthalater eller latex
(bortset fra 385102, der indeholder DEHP)



Helping all people
live healthy lives

1) Salgado CD, et al. Increased rate of catheter-related bloodstream infection associated with use of a needleless mechanical valve device at a long-term acute care hospital. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2007;28.
2) Rupp ME, et al. Outbreak of bloodstream infection temporally associated with the use of an intravascular needleless valve. Clinical Infectious Diseases. 2007;44.
3) <http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf>

BD Connecta™ infusionshane til infusion og invasiv trykmåling



- BD Connecta™ infusionshaner er resultatet af en vedvarende stræben efter forbedringer og forebyggende håndtering af potentielle risici inden for infusionsbehandling
- BD Connecta™ hanegreb gør det nemt at afgøre, om hanen er helt åben eller lukket
- En bestemt type polycarbonat og en højt udviklet produktionsteknologi bidrager til forbedret modstand mod revner
- BD Connecta™ kan også benyttes til invasiv trykmåling uden forlængerslange og uden BD Q-syte™
- BD Connecta™ infusionshane findes også med integreret BD Q-Syte™ desinficerbar split-septum-membran



Forlængerslange cm	Injektionsport	Hanegreb farve	Fyldevolumen ml	Flow lige/sideport ml/min	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
nej	nej	hvid	0,22	490/415	100/500	394600
nej	nej	hvid	0,22	490/415	100/500	394601
nej	nej	blå	0,22	490/415	100/500	394602
nej	BD Q-Syte™	hvid	0,31	490/390	50/500	394501
nej	nej	rød	0,22	490/415	100/500	394605
7	ja	hvid	0,80	350/305	50/250	394945
10	nej	hvid	0,80	360/320	50/250	394995
15 mikro	nej	hvid	0,30	86/71	50/250	394982
30 mikro	nej	hvid	0,45	42/43	50/250	394983
25	nej	hvid	1,50	305/290	20/100	394926
25	ja	hvid	1,50	305/290	20/100	394936
50	nej	hvid	2,80	260/245	20/100	394951
100	nej	hvid	5,50	200/190	20/100	394961
100	ja	hvid	5,50	200/190	20/100	394971

* med 2 farvekodede propper (rød og blå)

Materialeindhold

Hanehus: polycarbonat
Hanegreb: polyethylen
Øvrige dele: polypropylen, polyethylen, siliconeolie
Silicone (haner med injektionsport samt hane med BD Q-syte™)
Polyvinylchlorid – blødgører: DINCH (haner med forlængerslange)

Emballagemateriale

Papir
Polyethylen
Polyamid
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Betabestråling



3 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF (klasse IIa)

Indeholder ikke DEHP, phthalater eller latex



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Connecta™ Multiflo infusionskobling



- BD Connecta™ MultiFlo muliggør stor flowhastighed og samtidig minimalt restvolumen
- Farvekodning for nem identifikation af infusionslinjerne samt BD FloSwitch™ lukkeanordning med on/off-knap minimerer risikoen for fejlhåndtering af infusionslinjen
- fremstillet af polypropylen, hvilket mindsker risikoen for revnedannelse
- BD Connecta™ MultiFlo med forlængerslange giver endnu større sikkerhed ved yderligere at mindske risikoen for løsning af koblinger, lækage og kontaminering



Produktbeskrivelse	Fyldevolumen ml	Flow ml/min	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
BD Connecta™ MultiFlo 3				
Trevejskobling med Luer-Lok™ propper	0,8	380	10/100	394633
Med 25-cm-forlængerslange	1,8	325	10/100	394638
Med 50-cm-forlængerslange	2,8	190	10/100	394637
Med 150-cm-forlængerslange	6,7	110	10/100	394636
BD Connecta™ MultiFlo 5				
Femvejskobling med Luer-Lok™-propper	1,1	380	10/100	394653
Med 25-cm-forlængerslange	2,0	325	10/100	394658
Med 50-cm-forlængerslange	3,1	190	10/100	394657
Med 150-cm-forlængerslange	7,0	110	10/100	394656
BD Connecta™ MultiFlo-holder			5/50	394630
til dropstativ, sengestolpe m.v. (usteril)				

Materialeindhold

MultiFlo infusionskobling:
polypropylen, polyamid
polycarbonat, silicone
polyethylen, polyvinylchlorid
(MultiFlo med forlængerslange,
blødgører: DEHP)

BD Connecta™ MultiFlo holder:
polyacetal (polyoxymethylen)

Indeholder ikke latex

Emballagemateriale

Tyvek-laminat
Polyethylen
Polyester
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



5 år (uden slange)
3 år (med slange)

**CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(BD MultiFlo™ infusionskoblinger
klasse IIa BD Connecta™ MultiFlo
holder klasse I)**



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Connecta™ forlængerslange BD™ propper og BD™ beskyttelseshætte



- BD Connecta™ forlængerslanger er fremstillet af polyvinylchlorid med støbte fittings i ABS og polycarbonat. Infusionsslangerne findes i flere længder, og sortimentet omfatter også en slange med ekstra lille restvolumen beregnet til sprøjtepumper
- BD™ propper og BD™ beskyttelseshætter er beregnede til aflukning og sikring af f.eks. infusionskatetre, forlængerslanger, infusionsanordninger, haner og sprøjter



BD Connecta™ forlængerslange til infusion

Slangelængde cm	Fyldevolumen ml	Flow ml/min	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
25	1,75	490	50/500	397251
50	3,50	390	50/50	397509
100	7,00	300	50/50	397590
150	10,50	200	50/50	397400

BD Connecta™ forlængerslange mikro, til sprøjtepumpe

Slangelængde cm	Fyldevolumen ml	Flow ml/min	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
15	0,2	55	100/100	397201
30	0,3	45	50/50	397994
150	1,55	19	100/100	397608
200	2,10	24	100/100	397610
250	2,60	28	100/100	397612

BD™ Prop, Luer-Lok™, hanstik

	200/2000	394080
--	----------	--------

BD™ kombiprop, kombineret prop/beskyttelseshætte, Luer-Lok™-han-/hunstik

	100/5000	394075
--	----------	--------

BD™ beskyttelseshætte til Luersprøjte, Luer, hunstik, steril

	100/5000	394090
--	----------	--------

BD™ beskyttelseshætte til Luersprøjte, Luer, hunstik, usteril

	1000/10000	394089
--	------------	--------

Materialeindhold

Forlængerslanger:
ABS, polypropylen,
polycarbonat, polyvinylchlorid
(blødgører: TEHTM)

Emballagemateriale

Polyethylen
Polyamid
Karton
Bølgepap



Steriliseringemetode

Ethylenoxid



5 år (propper)
3 år (slanger)

Samtlige propper og beskyttelseshætter:
polypropylen

Indeholder ikke phthalater eller latex

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(BD™ beskyttelseshætte, usteril,
klasse I øvrige produkter
klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

- Bredt standardsortiment i topkvalitet
- Findes med og uden udluftningsventil
- Infusionsslange i PVC eller EVA (PVC-fri)
- Kan fås med returventil for at forhindre tilbageløb af lægemidler m.v. i infusionssættets slange
- Findes også med formonteret trevejshane og 10 cm slange for tilslutning til infusionskanyler



Betegnelse	Slangelængde cm	Udluftnings- ventil	Overtryks- ventil/ returventil	Andet udstyr	Slange- materiale	Inder-/trsp. emb.	Art.nr.
R 87	180	—	—	—	PVC	100/100	396364
R 87 P	150	ja	—	—	PVC	100/100	396351
R 87 P	180	ja	—	—	PVC	100/100	396350
R 87 P	180	ja	—	returventil	PVC	100/100	396353
R 87 P	220	ja	—	—	PVC	80/80	396390
R 87 P	180	ja	—	trevejshane med 10 cm slange	PVC	100/100	396354
R 87 P Flexinert	150	ja	—	—	EVA	100/100	396204
R 87 P Flexinert	180	ja	—	—	EVA	100/100	396352
R 87 P Flexinert	180	ja	—	returventil	EVA	100/100	396355
R 87 V	180	—	ja	—	PVC	100/100	396363
R 87 V	180	—	ja	returventil	PVC	100/100	396373

Materialeindhold

Drypkammer: ABS/polypropylen
 Væskefilter: polyamid
 Slange: se ovenfor
 Luer-Lok™-kobling: ABS
 Rulleklemme: polystyren/ABS
 Beskyttelseshætter: polyethylen
 Udluftningsventil: polypropylen
 Overtryksventil: Silicone
 Returventil: Silicone
 Trevejshane: polycarbonat, polyethylen

Emballagemateriale

Papir
 Polyamid
 Polypropylen
 Polyethylen
 Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
 (klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
 Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
 2620 Albertslund
 Tlf.: 43 43 45 66
 www.bd.com

BD Flopro™ overføringskanyle



- BD Flopro™ overføringskanyle giver en enkel, økonomisk og sikker håndtering ved blanding af lægemidler. Kanylens to spidser er siliconebelagte for at lette penetration af flaskemembranen



Produktbeskrivelse

Inder-/trsp.- emb.

Art.nr.

BD Flopro™ overføringskanyle

100/400

397015

Materialeindhold

Overførselsføringskanyle:
ABS, siliconeolie,
polypropylen

Indeholder ikke PVC, phthalater eller
latex

Emballagemateriale

Polyethylen
Polyamid
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD™ ensretterventil



Hvis der kobles mere end én IV-linje til en infusionslinje, kan der opstå tilbageløb.

Det skyldes, at væske altid flyder i retning af den mindste modstand.

- BD™ ensretterventil er en mekanisk envejsventil beregnet til at forhindre tilbageløb af infusionsvæske.
- BD™ ensretterventil passer til samtlige koblinger til IV-linjer som f.eks. multilumen-forlængersæt, IV-administrationssæt, trevejshaner m.m.



Produktbeskrivelse	Fyldevolumen ml	Flow ml/min	Inder-/trsp.emb.	Art.nr.
BD™ ensretterventil	0,2	250	100/100	397019

Materialeindhold

Luer-Lok™-hanstik: ABS

Luer-Lok™-hunstik: ABS

Membran: silicone

Beskyttelseshætte: polyethylen

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



3 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD PhaSeal™ Infusionsenheder



BD PhaSeal™ er et klinisk dokumenteret lukket system til lægemiddel-overførsel, der forhindrer interaktion af toksiske lægemidler med miljøet. BD PhaSeal infusionsenhederne er en del af systemet og giver en enkel og sikker infusion.

Produkterne leveres i et bredt udvalg, for at imødekomme dine behov.

- Infusion Set (C50) er et standard IV-administrationssæt, med tyngdekraftstilførsel og en integreret BD PhaSeal Connector, der giver en tør tilslutning for lukket tilførsel af toksiske lægemidler til IV-posere. Infusion Set har flow-stop for at lette forfyldningen. 20 dråber = 1 ml.
- Secondary Set (C61) er et standard sekundært sæt for tilslutning til den primære slange. Den har en integreret BD PhaSeal Connector, der giver en tør tilslutning for lukket tilførsel til IV-posere. Secondary Set har flow-stop for at lette forfyldningen.
- L Connector (C90) giver en tør tilslutning for lukket tilførsel af toksiske lægemidler til semirigide plastbeholdere eller glasflasker.
- Infusion Adapter (C100) giver en tør tilslutning til IV-posen, når lægemidlet administreres via et IV-pumpesæt. Infusion Adapter har en integreret BD PhaSeal Connector for lukket tilførsel til IV-posere og kan anvendes sammen med enhver type priming eller sekundært IV-sæt. Der bør anvendes et ikke-ventileret IV-sæt sammen med Infusion Adapter.



BD PhaSeal™ Infusionsenheder

	Dimension længde	Slange længde	Dimension højde	Priming- volumen	Slange- filter	Connector intern volumen	Antal enheder pr. peel-open pakke	Hylde / boks	Ref. nummer
Infusion Set (C50)*	1880 mm	1750 mm	42 mm	17,5 ml	15 µm	0,15 ml	1	– / 80	515300
Secondary Set (C61)	490 mm	400 mm	38 mm	3,0 ml		0,15 ml	1	30 / 120	515302
L Connector (C90)	34 mm		31,6 mm			0,14 ml	1	50 / 200	515305
Infusion Adapter (C100)	90 mm		43 mm			0,15 ml	1	50 / 200	515306
Infusion Adapter (C100Multi)	90 mm		43 mm			0,15 ml	5	250 / 250	515307

Produktmateriale:

Beskyttelseskappe (Ref. 515300 & 515302):
Polyethylen
Beskyttelseshætte (Ref. 515305 & 515306):
Polypropylen
Spyd (Ref. 515300 & 515302): Acrylonitril
butadien styren copolymer (ABS)
Spydhus (Ref. 515306): PP
Spydport: Termoplastisk elastomer (TPE)
Connector: ABS
Membran: Termoplastisk elastomer (TPE)
Dråbekammer: Polypropylen / SEBS
Slangefilter 15 µm: Polyamid
Slanger: PVC, DEHP-fri
Rulleklemme: Polypropylen / Polyethylen
Han Luer-lock: ABS-plast
Beskyttelseskappe med flow-stop: Polyethylen
/ Akrylisk copolymer

Indeholder ikke PVC (Ref. 515300 & 515302
indeholder DEHP-fri PVC), phthalater eller
latex

* PVC-fri fra april 2014

Emballagemateriale:

Tyvek-laminat
Polypropylen / polyethylen / polyamid
mekanisk papirmasse
træfibre
lim

Steriliseringsmetode:

STERILE EO Ethylenoxid
 Må ikke genanvendes/
kun engangsanvendelse
 4 år

CE-mærket i overensstemmelse
med MDD 93/42/EØF (Klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD PhaSeal™ tilbehør



BD PhaSeal™ er et klinisk dokumenteret lukket system til lægemiddel-overførsel, der forhindrer interaktion af toksiske lægemidler med miljøet. BD PhaSeal tilbehør optimerer dine rutiner og din tid, samtidig med at det er ergonomisk korrekt.

Produkterne leveres i et bredt udvalg, for at imødekomme dine behov.

- Assembly Fixture (M12) er en mekanisk enhed der anvendes til konsistent og enkel tilslutning af BD PhaSeal Protector til et lægemiddelhætteglas.
- Sprøjtebakke (M15) anvendes til at bære fyldte sprøjter under transport til administrationsområdet. Den er designet til at rumme 1-30 ml sprøjter med BD PhaSeal Injector.
- Infusionsklemme (M25) sikrer tilslutningen af BD PhaSeal Injector til BD PhaSeal Connector ved IV-slangefor greningen.
- Hætte til Injector membran (M50) der beskytter membranen på Injector mod direkte kontakt med kontaminerende flader under transport og opbevaring.



BD PhaSeal™ tilbehør

	Dimension længde	Dimension bredde	Dimension højde	Hylde / boks	Ref. nummer
Assembly Fixture (M12)				– / 1	515400
Sprøjtebakke (M15)	306 mm	70 mm	45 mm	– / 120	515401
Infusionsklemme (M25)	65,4 mm	22,5 mm		25 / 100	515403
Hætte til Injector membran (M50)		17,0 mm	15,8 mm	50 / 200	515404

Produktmateriale:

Ref. 515400:
Assembly fixture: Polyoxymethylen (POM)
Anodiseret aluminium
Rustfrit stål

Ref. 515401:
Sprøjtebakke: amorft polyethylenterephthalat (A-PET)

Ref. 515403:
Infusionsklemme: Polypropylen

Ref. 515404:
Hætte for Injector-membran: Polyethylen

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale:

Tyvek-laminat
Polypropylen / polyethylen / polyamid
mekanisk papirmasse
træfibre
lim

Steriliseringsmetode:

Ref. 515404:
STERILE EO Ethylenoxid

Ref. 515400, 515401 & 515403:
Usterile produkter



5 år (Ref. 515403 & 515404)

CE-mærket i overensstemmelse med MDD 93/42/EØF (Klasse I)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD PhaSeal™ Protector



BD PhaSeal™ er et klinisk dokumenteret lukket system til lægemiddel-overførsel, der forhindrer interaktion af toksiske lægemidler med miljøet. BD PhaSeal systemet er baseret på tre primære komponenter: Protector, Injector og Connector.

Produkterne leveres i et bredt udvalg, for at imødekomme dine behov.

- Protector er en trykudligningsenhed der tilsluttes permanent til hætteglasset og anvendes til forberedelse af lægemidler fra pulver- eller væskeform.
- BD PhaSeal Protector giver lukket trykudligning ved hjælp af det forseglede ekspansionskammer, samtidig med at den dobbelte membranteknik sikrer en tør forbindelse.
- Ekspansionskammeret sikrer effektivt at der hverken er overtryk eller vakuum, når luft eller væske sprøjtes ind i hætteglasset eller lægemiddel aspireres fra hætteglasset.
- Protector leveres til hætteglas med halsstørrelser fra Ø13 mm til Ø32 mm.



BD PhaSeal™ Protector

	Halsstørrelse hætteglas	Trykudligner	Farvekode	Antal enheder pr. peel-open pakke	Hylde / boks	Ref. nummer
Protector (P14)	Ø13 mm	20 ml	Blå	1	50 / 200	515100
Protector (P21)	Ø20 mm	20 ml	Rød	1	50 / 200	515102
Protector (P21Multi)	Ø20 mm	20 ml	Rød	5	250 / 250	515103
Protector (P28)	Ø28 mm	60 ml	Hvid	1	25 / 100	515104
Protector (P50)	Ø20 mm	50 ml	Grøn	1	25 / 100	515105
Protector (P50Multi)	Ø20 mm	50 ml	Grøn	5	150 / 150	515106
Protector (P53)	Ø32 mm	50 ml	Lilla	1	25 / 100	515107
Protector (P55)	Ø20 mm	50 ml	Lysegrøn	1	25 / 100	515117

Produktmateriale:

Kanyler: Rustfrit stål (AISI 304)
Ekspansionsfilm: Polyamid / Polypropylen (PA / PP)
Hydrofobisk filter: Polytetrafluorethylene (PTFE)
Filterkappe: Polypropylen (PP)
Membran: Termoplastisk elastomer (TPE)
Hus: Polypropylen (PP)
Beskyttelsesdæksel (Ref. 515100, 515102, 515103, 515105, 515106 & 515107): Polyethylen (PE)
Beskyttelsesdæksel (Ref. 515104): Polypropylen (PP)

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale:

Tyvek-laminat
Polypropylen / polyethylen / polyamid
mekanisk papirmasse
træfibre
lim

Steriliseringsmetode:

STERILE EO Ethylenoxid



Må ikke genanvendes/
kun engangsanvendelse



5 år

CE-mærket i overensstemmelse med MDD 93/42/EØF (Klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD PhaSeal™ Injector



BD PhaSeal™ er et klinisk dokumenteret lukket system til lægemiddeloverførsel, der forhindrer interaktion af toksiske lægemidler med miljøet. BD PhaSeal systemet er baseret på tre primære komponenter: Protector, Injector og Connector. Produkterne leveres i et bredt udvalg, for at imødekomme dine behov.

- Injector sikrer lukket lægemiddeloverførsel ved hjælp af dobbelte, tæt forseglede elastomeriske membraner.
- BD PhaSeal Injector er en overførselsenhed der tilsluttes en engangssprøjte eller IV-slange med standard Luer-Slip eller Luer-Lock tilkobling, for en tør lækagesikker forbindelse under forberedelse og administration.



BD PhaSeal™ Injector

	Ekstern montering	Dimension længde	Dimension bredde	Kanyle	Kanyle volumen	Hylde / boks	Ref. nummer
Injector Luer (N30C)	Luer	76 mm	21 mm	18G	0,04 ml	50 / 200	515001
Injector Luer-Lock (N35)	Luer-Lock	71 mm	21 mm	18G	0,04 ml	50 / 200	515003
Injector Luer-Lock "med hætte" (N35C)	Luer-Lock	71 mm	21 mm	18G	0,04 ml	50 / 200	515004
Injector Luer-Lock "med hætte" (N35CMulti)	Luer-Lock	71 mm	21 mm	18G	0,04 ml	250 / 250	515005

Produktmateriale:

Kanylehus: Polypropylen
Cylinder: Acrylonitril butadien styren copolymer (ABS)
Sikkerhedshylster: Polyoxymethylen (POM)
Stempel: Polypropylen
Membran: Termoplastisk elastomer (TPE)
Kanyle: Rustfrit stål (AISI 304)
Stempelpakning: Silicone
Låseskive (Ref. 515001): Rustfrit stål (AISI 304)
Beskyttelseshætte (Ref. 515001, 515004 & 515005): Polypropylen

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale:

Tyvek-laminat
Polypropylen / polyethylen / polyamid
mekanisk papirmasse
træfibre
lim

Steriliseringsmetode:

STERILE EO Ethylenoxid



Må ikke genanvendes/
kun engangsanvendelse



2½ år

CE-mærket i overensstemmelse med MDD 93/42/EØF (Klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD PhaSeal™ Connector



BD PhaSeal™ er et klinisk dokumenteret lukket system til lægemiddel-overførsel, der forhindrer interaktion af toksiske lægemidler med miljøet. BD PhaSeal systemet er baseret på tre primære komponenter: Protector, Injector og Connector.

Produkterne leveres i et bredt udvalg, for at imødekomme dine behov.

- Connector passer med BD PhaSeal Injector og giver en tæt overførsel af toksiske lægemidler via injektion eller infusion.
- BD PhaSeal Connector Luer-Lock (C35) er designet til anvendelse på Luer-Lock adgangsporten på patientens IV-slange.
- BD PhaSeal Connector Luer-Lock (C45) er designet til anvendelse på kanylefrie porte med interne stempler.



BD PhaSeal™ Connector

	Ekstern montering	Dimension længde	Dimension bredde	Connector / Y-Site intern volumen	Hylde / boks	Ref. nummer
Connector Luer Lock (C35)	Luer Lock	26 mm	17 mm	0,1 ml	50 / 200	515200
Connector Luer Lock (C45)	Luer Lock	34 mm	17 mm	0,1 ml	50 / 200	515202
Connector Twist Lock (C48)	Luer Lock	36 mm	17 mm	0,1 ml	50 / 200	515203

Produktmateriale:

Hus: Polypropylen
Membran: Termoplastisk elastomer (TPE)
Beskyttelseshætte: Polyethylen

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale:

Tyvek-laminat
Polypropylen / polyethylen / polyamid
mekanisk papirmasse
træfibre
lim

Steriliseringsmetode:

STERILE EO Ethylenoxid



Må ikke genanvendes/
kun engangsanvendelse



4 år

**CE-mærket i overensstemmelse
med MDD 93/42/EØF (Klasse IIa)**



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD™ arteriekanyler med BD FloSwitch™



BD™ arteriekanyler med BD FloSwitch™

- Til måling af arterietryk og gentagen blodprøvetagning i arteria radialis
- Fremstillet i siliconebehandlet PTFE og affaset i to trin for at lette anlæggelsen
- Udstyret med integreret BD FloSwitch™, der mindsker risikoen for tilbageløb og luftemboli



Kanyler	udv.Ø mm	Længde mm	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
20G	1,0	45	25/500	682245

Materialeindhold

Kanyler: rustfrit stål (AISI 304)
Metalkugle: rustfrit stål (AISI 316)
Kateter: PTFE (polytetrafluorethylen)
Øvrige dele: polydimetylsiloxan, polycarbonat, polypropylen, siliconegummi, polyphenylenoxid, polyethylen

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Steriliseringmetode
Ethylenoxid



5 år

**CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
klasse IIa (BD™ arteriekanyler)**



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Insyte-A™ arteriekateter



- Lederens blødt afrundede spids letter anlæggelsen af kateteret i arterien
- Karpunkturen bekræftes i det transparente tilbageløbskammer
- Skåret kanyler giver hurtigt blødsvar
- Cylinderspærre forhindrer tilbageløb og berøring med blod



Kateter G	Kateter længde mm	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
22G	38	blå	20/80	382802
22G	30	blå	20/80	382803
20G	38	lyserød	20/80	382805
20G	30	lyserød	20/80	382806

Materialeindhold

Kanyler: rustfrit stål (AISI 304)

Kateter: BD Vialon (polyurethankateter)

Øvrige dele: polycarbonat, polypropylen, polyphenylenoxid, polyethylen

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Steriliseringstype

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD™ arteriel angiografikanyle



BD™ Potts -Cournand-arteriekanyler

- Består af tre dele:
 - indvendig arteriekanyler
 - udvendig arteriekanyler
 - metalmandrin
- Hurtig og effektiv identifikation af arterien
- Benyttes til indføring af leder (0,80-0,95 mm)



BD™ Potts -Cournand-arteriekanyler

18G x 2 3/64	1,20 x 50	lyserød	10/50	408270
--------------	-----------	---------	-------	--------

Øvrige arteriekanyler

18G x 2 7/8	1,20 x 73	lyserød	10/50	408273
-------------	-----------	---------	-------	--------

Materialeindhold

Kanyler: rustfrit stål
Ansats: polypropylen
Sikring: polypropylen

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Tyvek-laminat
Polyethylen
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Whitacre™ spinalkanyle (pencil point)



- Optimal pencil-point-slibning giver minimalt hul i dura mater og dokumenteret lavere frekvens af post-spinal hovedpine
- Sidehullets størrelse og placering tæt på spidsen giver pålidelig administration ind i spinalrummet
- Glatte, spinalkanyler uden siliconebelægning til smidig penetration uden risiko for at få silicone ind i spinalvæsken
- Ergonomisk udformet, transparent ansats for behagelig følelse og hurtig identifikation af spinalvæsken
- Komplet, farvekodet sortiment fra 22G til 27G



BD Whitacre™ spinalkanyler

Dimensioner G x tommer	Dimensioner udv.Ø x længde mm	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
27G x 3 1/2	0,40 x 90	grå	25/200	402051
27G x 4 11/16	0,40 x 119	grå	10/50	409443
25G x 3 1/2	0,50 x 90	blå	25/200	402050
25G x 4 11/16	0,50 x 119	blå	10/50	409442
24G x 3 1/2	0,55 x 90	lilla	25/200	405104
22G x 3 1/2	0,70 x 90	sort	25/200	401995

BD Whitacre spinalkanyler, sampak med introducer

27G x 3 1/2 + introducer 22G	0,40 x 90	grå	25/200	405075
27G x 4 11/16 + introducer 22G	0,40 x 103	grå	25/200	405113
25G x 3 1/2 + introducer 20G	0,50 x 90	blå	25/200	405076
25G x 4 11/16 + introducer 20G	0,50 x 103	blå	25/200	405112

Introducer

22G x 1 1/4 (passer til 27G)	0,70 x 32	transparent	25/200	405261
20G x 1 1/4 (passer til 25G...26G)	0,90 x 32	transparent	25/200	405260

Materialeindhold

Kanyle: rustfrit stål
Ansats: polypropylen
Lim: epoxyresin

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Polyethylen
Tyvek-laminat
Karton
Bølgepap



Steriliseringmetode
Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse III)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD™ spinalkanyle (Quincke-slibning)



- Optimal Quincke-slibning for minimalt hul i dura mater
- Specialudformet mandrin, der minimerer risikoen for "biopsi-effekt" under indføringen
- Glatte, spinalkanyler uden siliconebelægning til smidig penetration uden risiko for at få silicone ind i spinalvæsken
- Ergonomisk udformet, transparent ansats for behagelig følelse og hurtig identifikation af spinalvæsken
- Komplet, farvekodet sortiment fra 18G til 27G



BD spinalkanyler

Dimensioner G x tommer	Dimensioner udv.Ø x længde mm	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
27G x 3 1/2	0,40 x 90	grå	25/200	405259
26G x 3 1/2	0,45 x 90	brun	25/200	405258
25G x 3	0,50 x 75	orange	25/200	405246
25G x 3 1/2	0,50 x 90	orange	25/200	405257
23G x 3 1/2	0,60 x 90	grøn	25/200	405240
22G x 1 1/2	0,70 x 38	sort	25/200	405254
22G x 2 1/2	0,70 x 65	sort	25/200	405244
22G x 3	0,70 x 75	sort	25/200	405255
22G x 3 1/2	0,70 x 90	sort	25/200	405256
20G x 1 1/2	0,90 x 38	gul	25/200	405251
20G x 3	0,90 x 75	gul	25/200	405252
20G x 3 1/2	0,90 x 90	gul	25/200	405253
19G x 3	1,10 x 75	creme	25/200	405249
19G x 3 1/2	1,10 x 90	creme	25/200	405250
18G x 3	1,20 x 75	lyserød	25/200	405247
18G x 3 1/2	1,20 x 90	lyserød	25/200	405248

Introducer

22G x 1 1/4 (passer til 27G...29G)	0,70 x 32	transparent	25/200	405261
20G x 1 1/4 (passer til 25G...26G)	0,90 x 32	transparent	25/200	405260

Materialeindhold

Kanyle: rustfrit stål
Ansats: polypropylen
Lim: epoxyresin

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Polyethylen
Tyvek-laminat
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse III)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD™ spinalkanyler (Quincke-slibning), specialstørrelser



- Optimal Quincke-slibning for minimalt hul i dura mater
- Specialudformet mandrin, der minimerer risikoen for "biopsi-effekt" under indføringen
- Glatte, spinalkanyler uden siliconebelægning til smidig penetration uden risiko for at få silicone ind i spinalvæsken
- Ergonomisk udformet, transparent ansats for behagelig følelse og hurtig identifikation af spinalvæsken
- Komplet, farvekodet sortiment fra 18G til 29G
- Art.nr. 405148, 405149, 405211 og 408360 er også velegnede til sympatikus-blokader.
- Art.nr. 408360 kan ligeledes benyttes som introducer/leder til BD™ Chiba-kanyler



BD spinalkanyler, neonatal

Dimensioner G x tommer	Dimensioner udv.Ø x længde mm	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
25G x 4 11/16	0,50 x 119	blå	10/50	405234
22G x 5	0,70 x 127	sort	10/50	405148
22G x 7	0,70 x 178	sort	10/50	405149
20G x 6	0,90 x 152	gul	10/50	405211
18G x 6	1,20 x 152	lyserød	10/50	408360

BD spinalkanyler, neonatal

25G x 1	0,50 x 25	blå	25/200	405243
25G x 2	0,50 x 50	blå	25/200	405245

BD spinalkanyler med introducer, sampak

27G x 3 1/2 + introducer 22G	0,40 x 90	grå	25/200	405069
26G x 3 1/2 + introducer 20G	0,45 x 90	brun	25/200	405065
25G x 3 1/2 + introducer 20G	0,50 x 90	orange	25/200	405084

Introducer

22G x 1 1/4 (passer til 27G...29G)	0,70 x 32	transparent	25/200	4052611
20G x 1 1/4 (passer til 25G...26G)	0,90 x 32	transparent	25/200	405260

Materialeindhold

Kanyler: rustfrit stål
Ansats: polypropylen
Lim: epoxyresin

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Polyethylen
Tyvek-laminat
Karton
Bølgepap



Steriliseringss metode
Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse III)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Perisafe™ Plus! epiduralsæt / BD Mini-Perisafe™ Plus! epiduralsæt



- Specialdesignet mandrin minimerer risikoen for "biopsi-effekt" og lækage, samtidig med at det giver bedre balance og kontrol ved indføringen
- Vinduesansats i polypropylen muliggør præcis indføring af epiduralkanylen i epiduralrummet
- Afstandsmarkering på både epiduralkanylen og kateter for præcis vurdering af placeringen
- Et nyt design af epiduralkateteret giver større flow, forbedret stabilitet og holdbarhed
- Afrundet atraumatisk kateterspids forhindrer beskadigelse af dura mater, hvilket minimerer risikoen for komplikationer
- God fornemmelse i LOR-sprøjten for nemmere at kunne finde ind til epiduralrummet
- Latexfri kateteradapter fastholder kateteret uden risiko for at knække



BD Perisafe™ Plus! epiduralsæt

Indhold	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
Weiss epiduralkanylen 18G × 80 mm Kateter 20G × 914 mm med 3 laterale huller og introducer	12/12	401508 M
Weiss epiduralkanylen 18G × 80 mm Kateter 20G × 914 mm med 1 distalt hul og introducer	12/12	401509 M
Weiss epiduralkanylen 17G × 80 mm Kateter 19G × 914 mm med 3 laterale huller og introducer	12/12	401506 M

BD Perisafe Plus! epiduralsæt indholder 0,2-µm-filter, Luer-Lok™ prop, kateteradapter og 7-ml-LOR-sprøjte

BD Mini-Perisafe™ Plus! epiduralsæt

Weiss epiduralkanylen 18G × 80 mm Kateter 20G × 914 mm med 3 laterale huller og introducer	12/12	401511 M
Weiss epiduralkanylen 17G × 80 mm Kateter 19G × 914 mm med 3 laterale huller og introducer	12/12	401510 M

BD Mini-Perisafe™ Plus! epiduralsæt indholder 0,2-µm-filter, Luer-Lok™ prop og kateteradapter

Materialeindhold

Kontakt BD for yderligere oplysninger

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Steriliseringsmetode
Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD
93/42/EØF (klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD Durasafe™ Plus! Epidural Lock, kombineret spinal-/epiduralsæt



- Hurtig og pålidelig, når der ønskes spinalblokada samtidig med epiduralanæstesi
- Epiduralkanylen med indbygget låsemekanisme, der nemt kan sikres/oplås med én hånd
- Epiduralkanylen er udstyret med store, ergonomiske vinger for præcis følelse ved placering af kanylen i epiduralrummet
- Afstandsmarkering på både epiduralkanylen og kateter til for præcis vurdering af kateterets placering
- BD Whitacre™ spinalkanylen er udstyret med afstandsmærker og kan indføres og låses op til 15 mm uden for epiduralkanylens spids
- Spinalkanylen kan i låst position roteres 360°
- Låsemekanismen kan reaktiveres for justering af spinalkanylen
- God fornemmelse i LOR-sprøjten



Epiduralkanylen G x mm	Spinalkanylen G x mm	Epiduralkateter G x mm	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
17G x 90	27G x 127	19G x 914	6 / 30	400286
18G x 90	27G x 127	20G x 914	6 / 30	400287

BD Durasafe™ Plus! Epidural Lock sæt indholder **BD Whitacre™ pencil-point-spinalkanylen**, **Weiss epiduralkanylen**, **epiduralkateter med lukket ende og introducer**, **kateteradapter**, **7-ml-LOR-plastsprøjte** og **0,2-µm-filter**

Materialeindhold

Kontakt BD for yderligere oplysninger

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Steriliseringsmetode
Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD
93/42/EØF (klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD™ epiduralkanyler og LOR-sprøjte



- Specialdesignet mandrin minimerer risikoen for "biopsi-effekt" og lækage, samtidig med at det giver bedre balance og kontrol
- Vinduesansats i polypropylen muliggør præcis indføring af epiduralkanylen i epiduralrummet
- Afstandsmarkering på epiduralkanylen for præcis vurdering af placering
- God fornemmelse i LOR-sprøjten for sikrere identifikation af epiduralrummet



Epiduralkanyler

udv.Ø x længde G x mm	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
Weiss 20G x 90 (med vinger)	10/50	405186
Weiss 18G x 90 (med vinger)	10/50	405188
Weiss 18G x 127 (med vinger)	10/50	405190
Weiss 17G x 90 (med vinger)	10/50	405191
Weiss 17G x 127 (med vinger)	10/50	405193
Weiss 16G x 90 (med vinger)	10/50	405194
Tuohy 20G x 90 (uden vinger)	10/50	405028
Tuohy 18G x 90 (uden vinger)	10/50	405018
Tuohy 17G x 90 (uden vinger)	10/50	405092

LOR-sprøjte i plast (LOR = loss of resistance)

7 ml Luer	10/50	405292
7 ml Luer-Lok™	10/50	405291

Materialeindhold

Kontakt BD for yderligere oplysninger

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Steriliseringsmetode
Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD
93/42/EØF (klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD™ biopsikanyler



BD Westcott™ biopsikanyler

- BD Westcott™ biopsikanyler har et 2,1 mm lateralt hul
- Obturatoren hages fast i kanyleansatsen for at forebygge "biopsi-effekt" ved indføring af kanylen
- Kanylen er cm-inddelt for nemmere vurdering af dens beliggenhed
- Benyttes til histologisk, cytologisk og bakteriologisk prøvetagning

BD™ Chiba kanyler

- 22G Chiba-kanyler med tynd væg, kort slibevinkel og stabilt greb mindsker risikoen for at beskadige kar eller væv
- Obturatoren hages fast i kanyleansatsen for at forebygge "biopsi-effekt" ved indføring af kanylen
- Kanylen er cm-inddelt for nemmere vurdering af dens beliggenhed
- Findes i to forskellige længder



BD Westcott™ biopsikanyler

Dimensioner G x tommer	Dimensioner udv.Ø x længde mm	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
22G x 3 1/2	0,70 x 90	sort	10/50	408265
22G x 7	0,70 x 178	sort	10/50	408267
22G x 5 1/2	0,70 x 140	sort	10/50	408266
20G x 3 1/2	0,90 x 90	gul	10/50	408268
20G x 7	0,90 x 178	gul	10/50	408264
20G x 5 1/2	0,90 x 140	gul	10/50	408263

BD™ Chiba kanyler

22G x 6	0,70 x 153	sort	10/50	408268
22G x 8	0,70 x 203	sort	10/50	408269

Materialeindhold

Kanyler: rustfrit stål
Ansats: polypropylen
Lim: epoxy
Medicinsk siliconeolie

Emballagemateriale

Tyvek-laminat
Polyethylen
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD E-Z Scrub™, til præoperativ håndvask



- Fremstillet i blød og stabil plast for effektiv men samtidig skånsom, præoperativ håndvask. Den ene side er udformet som en neglebørste for at fjerne smuds under neglene. Den anden side er udformet som en svamp for mere skånsom rengøring af f.eks. over- og underarme
- I hver emballage medfølger en neglerenser
- 100% af elforbruget der anvendes ved produktion af dette produkt kommer fra vedvarende energi.



Udførelse	Steril	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
tør	ja	grøn	30/300	371607



Materialeindhold

Polyethylen
Polyurethan
Polystyren

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Polyamid
Polyester
Karton
Bølgepap

Steriliseringstype

Gammastråling



5 år

**Ikke CE-mærket –
Ikke omfattet af MDD
93/42/EØF**



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

BD™ præanæstesisæt



- Færdigt vaskesæt beregnet til anlæggelse af epiduralkatetre samt ved spinal anæstesi
- Fleksibelt, tidsbesparende og økonomisk



Indhold	Art.nr.	Art.nr.
	400296M	400293M
1 x 20 ml Luer-Lok™ tre-komponentsprøjte	ja	ja
1 x 5 ml Luer-Lok™ tre-komponentsprøjte	ja	nej
1 x 5 ml Luer tre-komponent sprøjte	ja	ja
1 x 2 ml Luer tre-komponentsprøjte	ja	ja
1 filterkanyler 19G/1,1 x 40 mm	ja	ja
1 kanyler 18G/1,25 x 40 mm	ja	ja
1 kanyler 25G/0,5 x 25 mm	ja	ja
1 kanyler 21G/0,8 x 50 mm	ja	ja
2 vaskesvampe	ja	ja
5 kompresser	ja	ja
1 lille serviet	ja	ja
2 bakker	ja	ja
1 hulklæde	ja	nej
1 klæde med klæbestrimmel	nej	ja
Inder-/trsp.emb.	12	12

Materialeindhold

Kontakt BD for yderligere oplysninger

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Steriliseringsmetode
Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD
93/42/EØF (klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

Målsætning:

At øge personalets viden om forebyggelse af stikskader og mindske af risikoen for blodeksponering samt informere om det ny EU-direktiv om sikkerhed for sundhedspersonale.

Hovedindhold:

- Information om det ny EU-direktiv
- Risici for personalet
- Hvad er blodeksponering?
- Fakta om risiciene
- Hvem rammes?
- Hvorfor sker det?
- Skal det anmeldes? Hvad siger reglerne?
- Konsekvenser for den enkelte og for sundhedsplejen
- Løsninger på problemet


BD's sikkerhedsseminar henvender sig til alle personalegrupper. Det kan benyttes som udgangspunkt for hospitalets egne sikkerhedsaktiviteter samt til bevidstgørelse af medarbejderne om risici forbundne med blodeksponering.

Kursusprogrammet kan med fordel suppleres med lokale data og eventuelt støtte igangværende eller påtænkte forebyggende tiltag.

Vi kan bidrage med en "løsningsmodel", der er et effektivt værktøj til analyse og identifikation af områder, hvor der er behov for at tilvejebringe et mere sikkert arbejdsmiljø.



BD kan desuden stille EPINet™ til rådighed, der er en software til nem håndtering og registrering af stikskader. Dette er naturligvis gratis for BD's kunder.

Kontakt jeres BD-repræsentant for flere oplysninger.

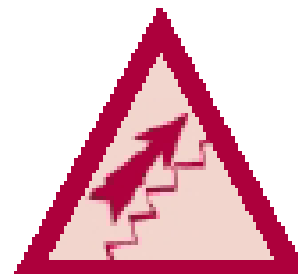

Smitterisici forbundne med stikskader ved en identificeret risikopatient:

HIV 1:300
hepatitis C 1:30
hepatitis B 1:3

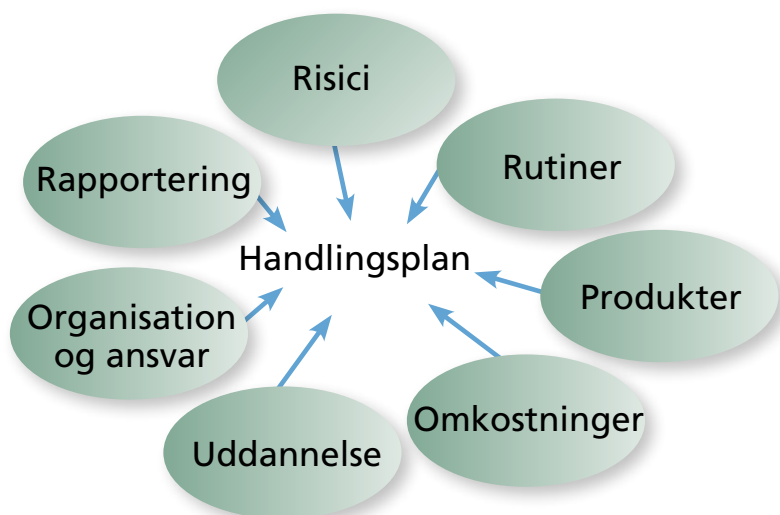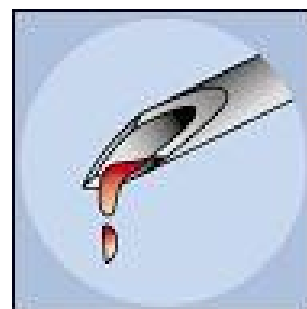

Mål

At bibringe relevant personale viden om optimal fremgangsmåde ved perifer IV-terapi.

Kursusprogrammet omfatter bl.a. anatomi, fysiologi, hygiejne, anlæggelsesteknik, daglig og periodisk vedligeholdelse samt skylning.

Hovedindhold:



1. Anatomi og fysiologi
2. Valg af anlæggelsessted
3. Valg af kanyler
4. Hygiejne
5. Anlæggelsesteknik
6. Skylleteknik
7. Sikkerhed
8. Love og bestemmelser
9. Andet

BD's kursusprogram henvender sig til alt sundhedspersonale, der i dagligdagen håndterer IV-katetre.


Programmet består af flere separate moduler, således at det er muligt at tilpasse undervisningen efter behov og ønsker. Undervisningen er inddelt i teoretiske gennemgange og praktiske øvelser, hvor det er relevant.

Kurset varer typisk 2-4 timer og gennemføres for minimum 12 deltagere.


Kontakt jeres BD-repræsentant for flere oplysninger.

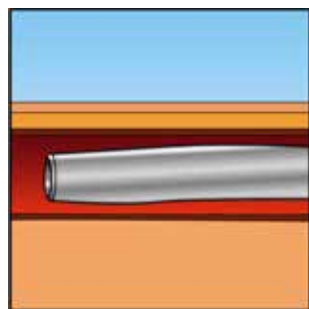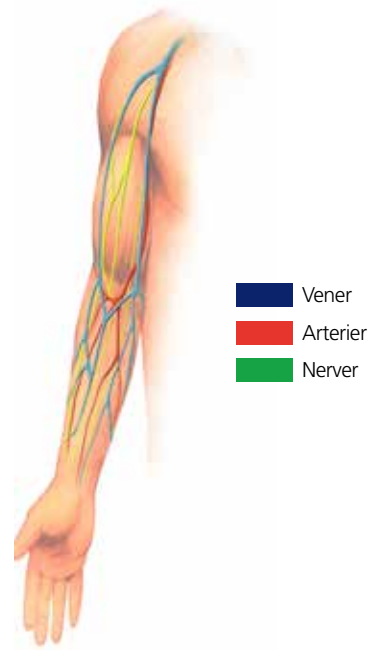

For tyndt kar i forhold til det valgte kateter

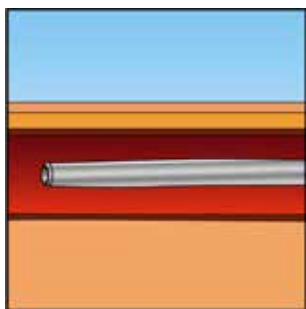

Korrekt forhold mellem vene og kateter

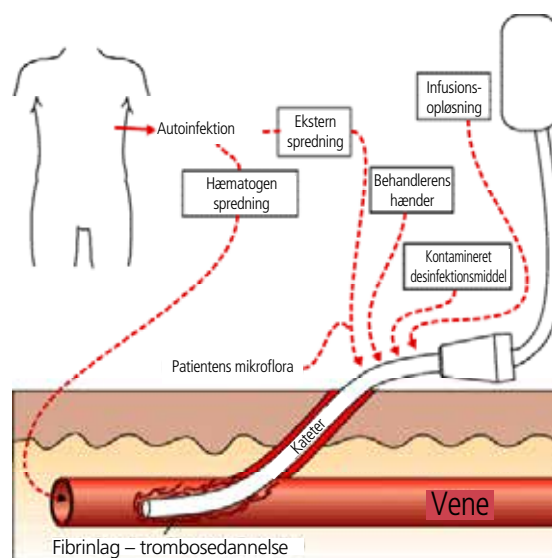

BD's kursusprogram – skylning af IV-katetre



Målsætning:

At øge personalets viden om, hvad et intravenøst kateter skal gennemsykles med, samt hvornår og hvordan. Uddannelsen gennemgår mulige risici ved eksisterende skyllepraksis som f.eks. krydskontaminering og brud på aseptisk teknik. Endvidere gennemgås fordelene ved forfyldte NaCl-sprøjter.

Kurset gennemgår forskellige aspekter af skylleproceduren. Vidste du f.eks., at risikoen for kontaminering af skyllevæsken er hele 8 % ved konventionel indlægning?³⁰


Hovedindhold:

1. Retningslinjer for skylning
2. Hvordan foregår skylning i dag?
3. Hvilke risici er der ved skylning?
4. Hvordan kan den nuværende skylleteknik forbedres?
5. Debat

BD's kursusprogram i skylleteknik henvender sig til sygeplejersker og læger, men andre personalegrupper er også velkomne. Programmet hjælper deltagerne til at forstå vigtigheden af en korrekt skylleteknik og kan desuden bidrage til at udvikle en standardiseret bedste praksis for skylning.

Programmet indeholder forskellige aspekter af kateterrelateret skylleteknik som f.eks. kontamineringsrisiko, risiko for trombocytopeni fremkaldt af heparin samt sikring af minimalt blodtilbageløb ved diskonnekt af skyllesprøjten.

Kontakt jeres BD-repræsentant for flere oplysninger.

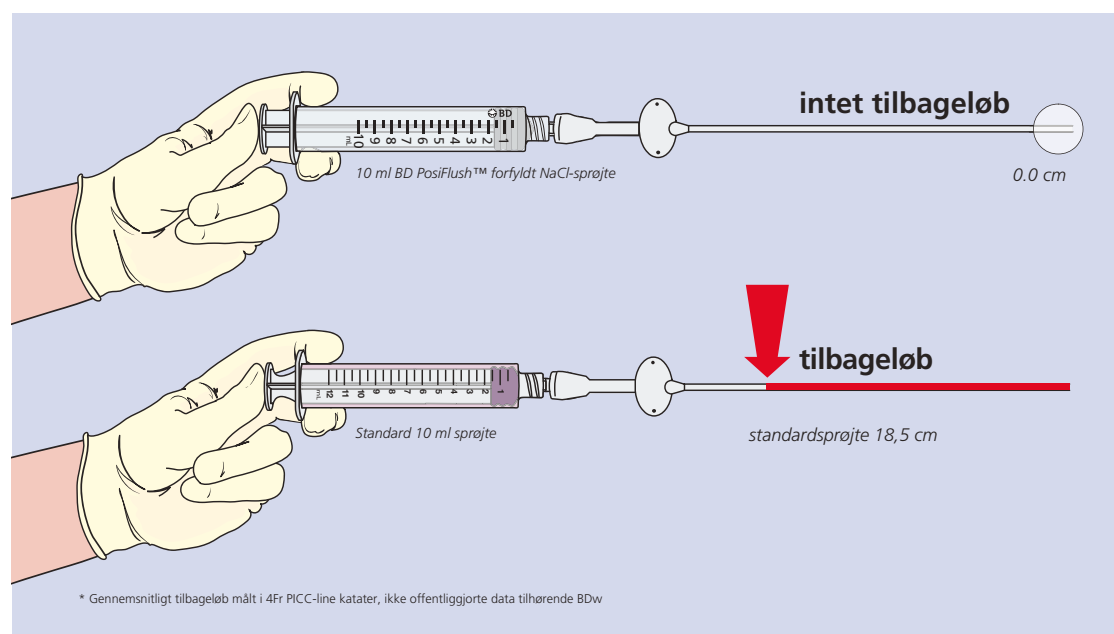

Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com

Kompatibilitet mellem BD sprøjter og udvalgte sprøjtepumper											
Producent	Anordning	BD Plastikpak	BD Plastikpak	BD Plastikpak	BD Plastikpak	BD Plastikpak	BD Plastikpak	BD Plastikpak	BD Perfusion	Certificering	Reference
		3 ml Luer-Lok™	5 ml Luer-Lok™	10 ml Luer-Lok™	20 ml Luer-Lok™	30 ml Luer-Lok™	50 ml Luer-Lok™	50 ml Luer-Lok™	50 ml Luer-Lok™		
		Ref. 300910	Ref. 309649	Ref. 300912	Ref. 300629	Ref. 301229	Ref. 300865	Ref. 300136			
		Ref. 309658	Ref. 300911				Ref. 300869**	Ref. 300137			
								Ref. 300138**			
								Ref. 300139**			
Cardinal Health	Alaris CC		X	X	X	X	X	X	Producentens brugsanvisning		http://www.cardinal.com/uk
Cardinal Health	Alaris GH		X	X	X	X	X	X	Producentens brugsanvisning		http://www.cardinal.com/uk
Cardinal Health	Alaris GS		X	X	X	X	X	X	Producentens brugsanvisning		http://www.cardinal.com/uk
Cardinal Health	Alaris PK		X	X	X	X	X	X	Producentens brugsanvisning		http://www.cardinal.com/uk
Cardinal Health	Alaris IVAC P5000 Mk II		X	X	X	X	X	X	Producentens brugsanvisning		http://www.cardinal.com/uk
Cardinal Health	Alaris IVAC P6000		X	X	X	X	X	X	Producentens brugsanvisning		http://www.cardinal.com/uk
Cardinal Health	Alaris IVAC P7000		X	X	X	X	X	X	Producentens brugsanvisning		http://www.cardinal.com/uk
Cardinal Health	Alaris IVAC TVA		X	X	X	X	X	X	Producentens brugsanvisning		http://www.cardinal.com/uk
Acromed, Sveits	Syramed mSP 6000 LITE		X	X	X	X	X	X	med B. Braun OPS-indstilling	Producentens brev	mail 2007-05-24
Acromed, Sveits	Syramed mSP 6000 Standard		X	X	X	X	X	X	med B. Braun OPS-indstilling	Producentens brev	mail 2007-05-24
Acromed, Sveits	Syramed mSP 6000 De Luxe		X	X	X	X	X	X	med B. Braun OPS-indstilling	Producentens brev	mail 2007-05-24
Acromed, Sveits	Syramed mSP 6000 PCA		X	X	X	X	X	X	med B. Braun OPS-indstilling	Producentens brev	mail 2007-05-24
Acromed, Sveits	Syramed mSP 6000 Anaesthesia		X	X	X	X	X	X	med B. Braun OPS-indstilling	Producentens brev	mail 2007-05-24
Codan	Arctus Medical AG, Sveits, green stream® SYP ARGUS 600			X	X	X	X	X			Bekræftet af producent (mail af 11.10.2004)
B. Braun	Perfusor Compact				X		X		Producentens brugsanvisning	Producentens brugsanvisning findes som PDF-fil	
B. Braun	Perfusor Compact S	X							med B. Braun OPS-indstilling	BD intern test	
B. Braun	Perfusor FM	X	X	X	X	X	X	X	med B. Braun OPS-indstilling	BD intern test	
B. Braun										Producentens brugsanvisning	Brugsanvisningen findes som PDF-fil
B. Braun	Perfusor Space	X		X	X	X	X	X	med B. Braun OPS-indstilling	BD intern test	Brugsanvisningen findes som PDF-fil
B. Braun	Perfusor Secura FT								med B. Braun OPS-indstilling	BD intern test	MHRA's testrapport kan hentes online

Kompatibilitet mellem BD sprøjter og udvalgte sprøjtepumper

Producent	Anordning	BD Plastipak 3 ml Luer- Lok™	BD Plastipak 5 ml Luer- Lok™	BD Plastipak 10 ml Luer- Lok™	BD Plastipak 20 ml Luer- Lok™	BD Plastipak 30 ml Luer- Lok™	BD Plastipak 50 ml Luer- Lok™	BD Perfusion 50 ml Luer- Lok™	Certificering	Reference
Fresenius – Kabi	Injectomat 2000									
Fresenius – Kabi	Injectomat 2000 Anesthesia				X		X	X	Producentens brev	2001-05-23
Fresenius – Kabi	Injectomat 2000 P								Producentens brev	2001-05-23
Fresenius – Kabi	Injectomat C/CP PS								Producentens brev	2001-05-23
Fresenius – Kabi	Injectomat Agila		X	X	X	X	X	X	Kompatibel med de mest udbredte sprøjter	Producentens brugsanvisning
Fresenius – Kabi	Mod DPS		X	X	X	X	X	X	Producentens brev	2001-05-23
Fresenius – Kabi	Programm 2S			X	X	X	X	X	Producentens brev	2001-05-23
Fresenius – Kabi	Pilot A2				X		X	X	Producentens brev	2001-05-23
Fresenius – Kabi	Fresenius Pilot C				X		X	X	Producentens brev	2001-05-23
Smiths Medical	Graseby 3400		X	X	X	X	X		Producentens brochure	www.smiths-medical.com
Smiths Medical	Graseby 3500		X	X	X	X	X		Producentens brochure	www.smiths-medical.com
Smiths Medical	Graseby G3100			X	X	X	X		Producentens brochure	www.smiths-medical.com
Smiths Medical	Graseby G3150		X	X	X	X	X		Producentens brochure	www.smiths-medical.com
Smiths Medical	Graseby G3200		X	X	X	X	X		Producentens brochure	www.smiths-medical.com
Smiths Medical	Graseby G3300				X	X	X		Producentens brochure	www.smiths-medical.com
Smiths Medical	Medfusion 3500	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)		Producentens brochure	www.smiths-medical.com
Smiths Medical	Omnifusion	X	X	X	X	X	X		Producentens brochure	www.smiths-medical.com
Terumo	Terufusion STC 526				X	X	X		Producentens brochure nævner kompatibilitet med de mest udbredte fabrikater sprøjter. Brugsanvisningen nævner specifikt BD Plastipak	Uddrag af brugsanvisningen fremsendes på forlangende
Terumo	Terufusion TE 331, TE 332			X	X	X	X		Producentens brochure nævner kompatibilitet med de mest udbredte fabrikater sprøjter. Brugsanvisningen nævner specifikt BD Plastipak	
Terumo	Terufusion TE 371, TE 372			X	X	X	X		Producentens brochure nævner kompatibilitet med de mest udbredte fabrikater sprøjter. Brugsanvisningen nævner specifikt BD Plastipak	
CME – McKinley	T34	X	X	X	X	X	X		Producentens brochure ADVARSEL: Det automatiske detekterings-system for sprøjtemodel afhænger stærkt af BD-sprøjtemodel.	
	Forklaring:									
	** BD ravgule sprøjter er konstruerede på præcis samme måde som klare sprøjter og er således kompatible med de samme pumper. Bekræftelse fremsendes på forlangende.									

Internationale standarder for brug og håndtering af beholdere til stikkende/skærende affald

BD™ Sharps beholder opfylder de mest udbredte internationale standarder for brug og håndtering af beholdere til stikkende/skærende affald. Aktuelle standarder er BS7320 (Storbritannien), NF X3-500 (Frankrig) og UN3291 (EU's anbefalinger for transport af farligt gods).

BRUG PÅ STEDET			TRANSPORT
Kriterier:	BS7320	NF X30-500	UN3291
Dimensioner og form af åbning svarer til tilsigtet brug.	Ja	Ja	Ikke specificeret
Den dominerende farve på beholderen er gul	Ja	Ja	Ikke specificeret
Minimumstykkelse af væg / modstand mod nåleperforation	Gennemsnitlig modstand > 15 N Minimum >12,5 N	Gennemsnitlig modstand > 18 N Minimum >12,5 N	Ikke specificeret
Slagfasthed	Testmetode: Den fulde beholder slippes fra 1 m højde ved stuetemperatur.	Testmetode: Den fulde beholder slippes fra 1,2 m højde efter opbevaring ved +5 °C i 24 timer	Testmetode: Den fulde beholder slippes fra 1,2 m højde ved -18 °C
Lækagebestandighed	Beholderen slippes i henhold til en specifik testmetode.	Beholderen slippes i henhold til en specifik testmetode.	Beholderen slippes i henhold til en specifik testmetode.
Midlertidig tillukning	Ikke specificeret	Ja	Ikke specificeret
Endelig tillukning			Ja
Indikation af indhold/volumen	Ja	Ja	Ikke specificeret
Indikation af maksimalt fyldevolumen	Ja	Ja	Ikke specificeret
Returventil/overløbsikring	Ikke et krav	Ikke et krav	Ikke specificeret
Kanyleudskiller	Ikke specificeret	Ikke specificeret	Ikke specificeret
Håndtag	Ja	Krav til beholdere på over 2 l	Ikke specificeret
Modstand/kraft i håndtag er testet	Ja	Krav til beholdere på over 2 l	Ikke specificeret
Monteringsbeslag kan fås	Ikke specificeret	Krav til beholdere med kanyleudskiller samt beholdere med en højde større end 2 x dennes længde	Ikke specificeret
Specifikke krav med hensyn til mærkning	Ja	Ja	Ja
Brugsanvisning til brug og tillukning	Ja	Ja	Ja
Skal forbrændes	Ja	Ja	Ikke specificeret
Tåler autoklavering	Ikke specificeret	Ikke specificeret	Ikke specificeret