


---

# B-cyto

---

## Citología de capa fina en base líquida.

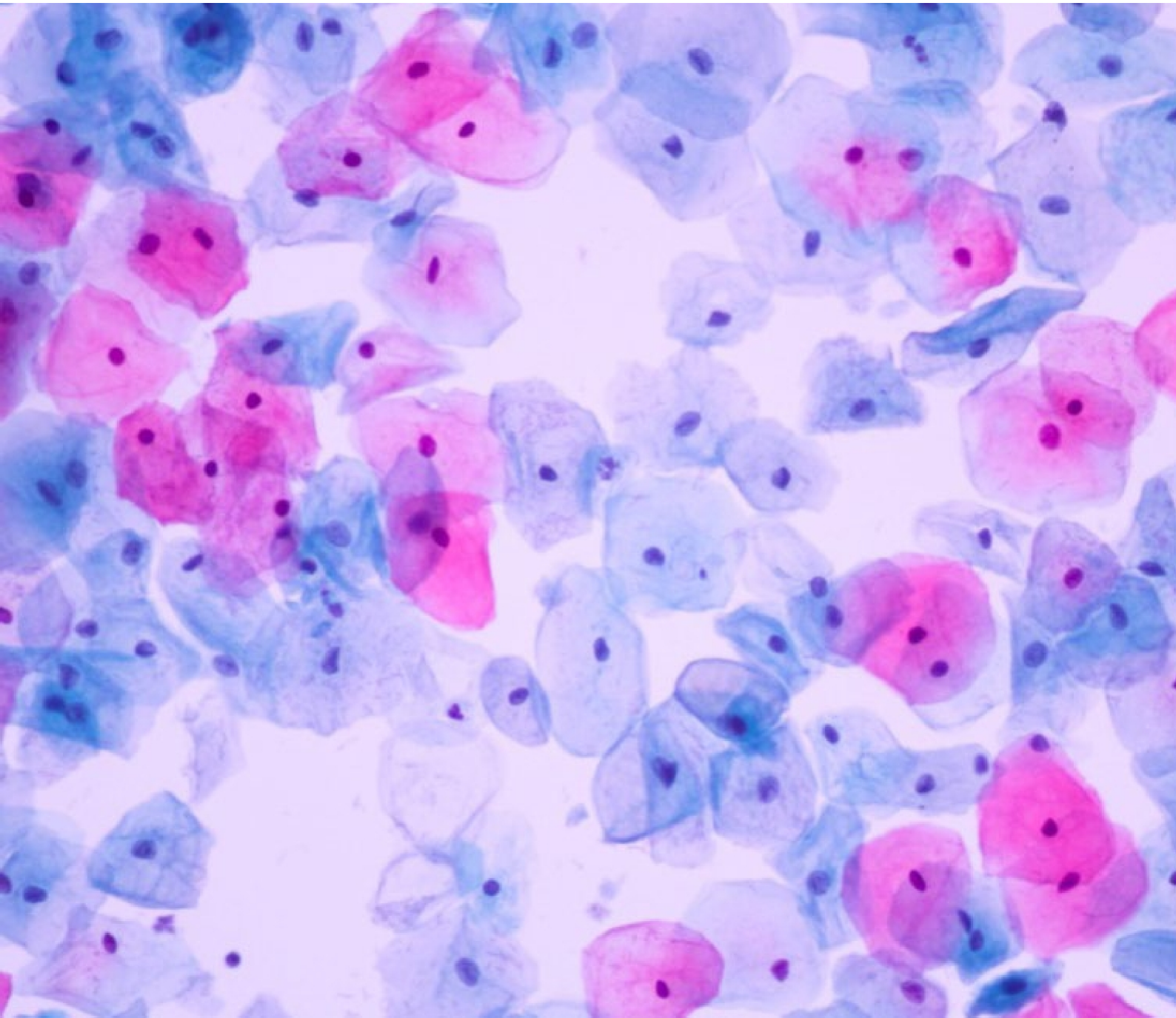

## PROCESADOR CITOLÓGICO B-CYTO

CÓDIGO: CY03



Es un procesador de citología de capa fina en fase líquida.

### VENTAJAS

1. Tamaño reducido (30 x 30 x 23,5 cm).
2. Velocidad: procesa de 1 a 4 muestras en 20 segundos (rendimiento medio de 120 muestras por hora).
3. Fácil de usar, gracias al soporte que combina el frasco y el portaobjetos.
4. Económico, en comparación con otras soluciones disponibles en el mercado.

## FILTROS B-CYTO


CÓDIGO: ZP30



El dispositivo consta de dos partes, ambas con una membrana filtrante. La primera capa de membrana retiene la mucosidad y los fragmentos de tejido. Los poros de 7 nm de la segunda membrana retienen todos los elementos esenciales para realizar un diagnóstico preciso al eliminar el fondo. La esponja, situada debajo de la membrana, evita la deformación de las células durante el moldeo de la mancha en el portaobjetos.

## FRASCO DE TRANSPORTE B-CYTO

CÓDIGO: 05-01C54T

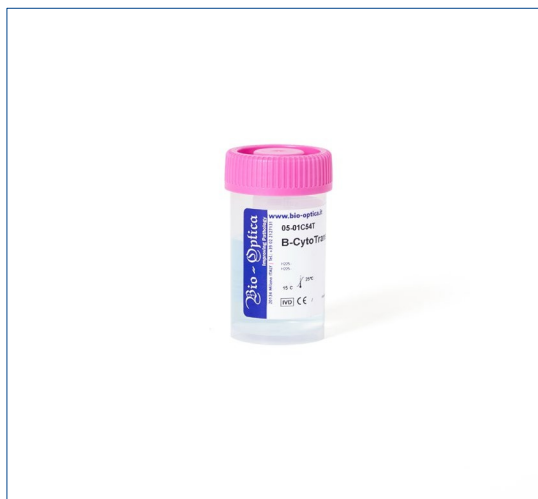

Recipiente con fijador para citología líquida. El envase consta de 54 frascos precargados con 25 ml.

## B-CYTO RACK

CÓDIGO: 05-900901




Estante transparente de plexiglás a prueba de golpes con 32 ranuras para facilitar el transporte de los recipientes B-Cyto Transport Jar. El estante está equipado con 32 ranuras especiales adicionales para emparejar el frasco con el portaobjetos correspondiente durante la muestra procesamiento, eliminando posibles errores de correspondencia entre muestras y portaobjetos. La base extraíble facilita la limpieza y desinfección del soporte. También cuenta con prácticas asas para un cómodo transporte.



## FIJADORES

PRODUCTO	PACK	CÓDIGO
Bio-fix: Fijador en spray para citología vaginal	4 x 200 ml	05-X200
Fijador de Saccomanno Fijador para muestras con mucosidad	1x1 l	05-01043/L

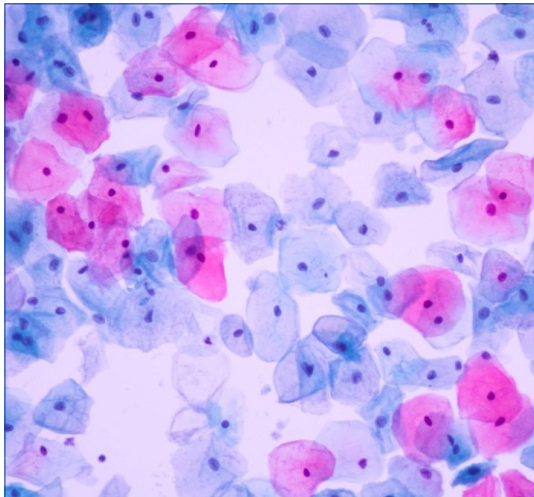

## SOLUCIONES DE TINTE PAPANICOLAOU

Tinción rápida, colores brillantes y excelentes detalles celulares. Las soluciones no contienen metanol.

PRODUCTO	PACK	CÓDIGO
Papanicolaou Harris hematoxilina	1x500 ml	05-12011
	1x1 l 1x2,5 l	05-12011/L
	l	05-12011E
Papanicolaou OG6	1x500 ml	05-12013
	1x1 l 1x2,5 l	05-12013/L
	l	05-12013E
Papanicolaou EA50	1x500 ml	05-12019
	1x1 l 1x2,5 l	05-12019/L
	l	05-12019E
Papanicolaou EA65	1x500 ml	05-12017
	1x2,5 l	05-12017/L



## B-CYTO CEPILLO CERVICAL

CÓDIGO: C1-24

Cepillo estéril para la toma de muestras endocervicales, utilizado durante la citología vaginal. Tiene un cabezal con cerdas de nailon suaves, diseñado para recoger eficazmente las células sin causar molestias.



## LÁMINAS DE MICROSCOPIO

Borde pulido a 90°, esquina recortada a 45°, limpios y desengrasados, transparentes y sin ningún tipo de adsorción selectiva.

# B-cyto

## Citología en base líquida

La citología en capa fina es una técnica que permite obtener una capa uniforme de células en un portaobjetos, mejorando la calidad y la precisión del diagnóstico.

### VENTAJAS

- Mayor precisión: reduce la presencia de artefactos y contaminantes como moco y sangre.
- Mejor conservación: las muestras se pueden almacenar durante más tiempo sin deteriorarse.
- Estandarización: el proceso estandarizado reduce los errores de preparación.

### APLICACIONES

- Prueba de Papanicolaou: se utiliza para la detección del cáncer de cuello uterino.
- Aspiración con aguja: se utiliza para el análisis de muestras obtenidas mediante aspiración con aguja.



